



МАНУАЛ

Оформление экрана

Для Touch 1.0 и 2.0: цвета экрана в настройках (Vidicap OR или исходные серые) и тестовая тема UI 3.0 с новым меню и восемью оформлениями.

Для врачей, техников и администраторов

05.10.2026

Содержание

Vidicap Touch 2.0

Vidicap Touch 1.0

Vidicap UI 3.0 (тест)

Как включить на Touch 2.0

Touch 1.0: облегчённая «Ночь»

Что важно знать

На экране Vidicap можно выбрать оформление: **«Vidicap OR»** (как сейчас), **«Исходное»** (серое и синевато-серое, как в первых версиях Vidicap) или тестовую тему **«Vidicap UI 3.0»** («Ночь» и «День», см. ниже). В «Vidicap OR» и «Исходном» меняются только цвета: экраны, кнопки и их порядок остаются прежними. Выбор есть в базовой программе обеих ревизий, ставить модуль не нужно.


Ревизия	Что нужно
Vidicap Touch 2.0	версия 2.24.0 и новее; «Vidicap UI 3.0» — 2.34.0 и новее; состояние на плитках всех доп. модулей, крупно посередине плитки — 2.43.0 и новее
Vidicap Touch 1.0	программа 1.27.0 и новее; «UI 3.0 · Ночь» — 1.31.0 и новее, состояние на плитках модулей и экраны модулей в цветах темы, крупное содержимое на плитках и новые внутренние экраны — 1.37.0 и новее; кнопка «Платформа» 1.28.0 и новее, для «UI 3.0 · Ночь» 1.37.0 и новее (переводы на английский и белорусский)

Обе обновляются с экрана: «Платформа» → «Проверить обновления». После обновления ничего не меняется: остаётся «Vidicap OR», пока на устройстве не выберут другое.


Vidicap Touch 2.0

1. В главном меню нажмите **«Настройки»**. Если включён вход по RFID-меткам, приложите метку техника.
2. Слева нажмите **«Оформление»**.
3. Справа выберите **«Vidicap OR»** или **«Исходное»**. Экран сразу перекрашивается, перезапуск не нужен.



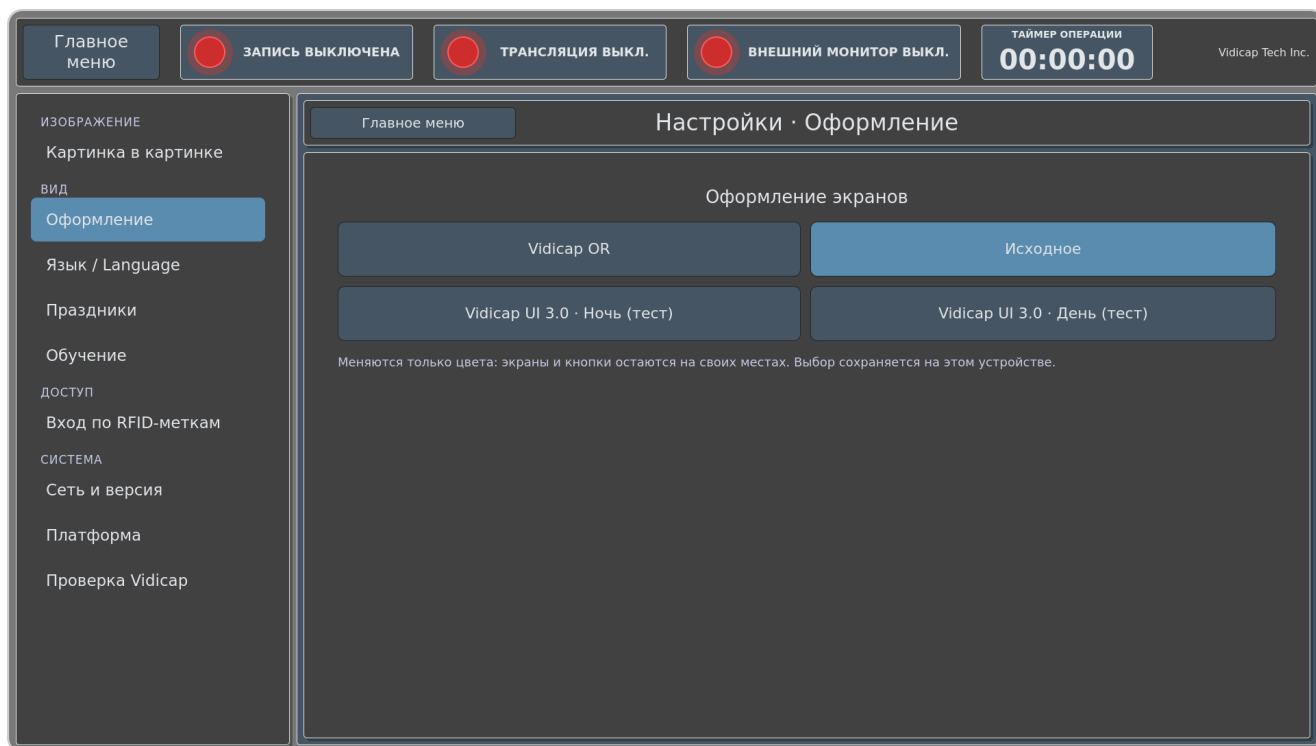


Главное меню в двух оформлениях:

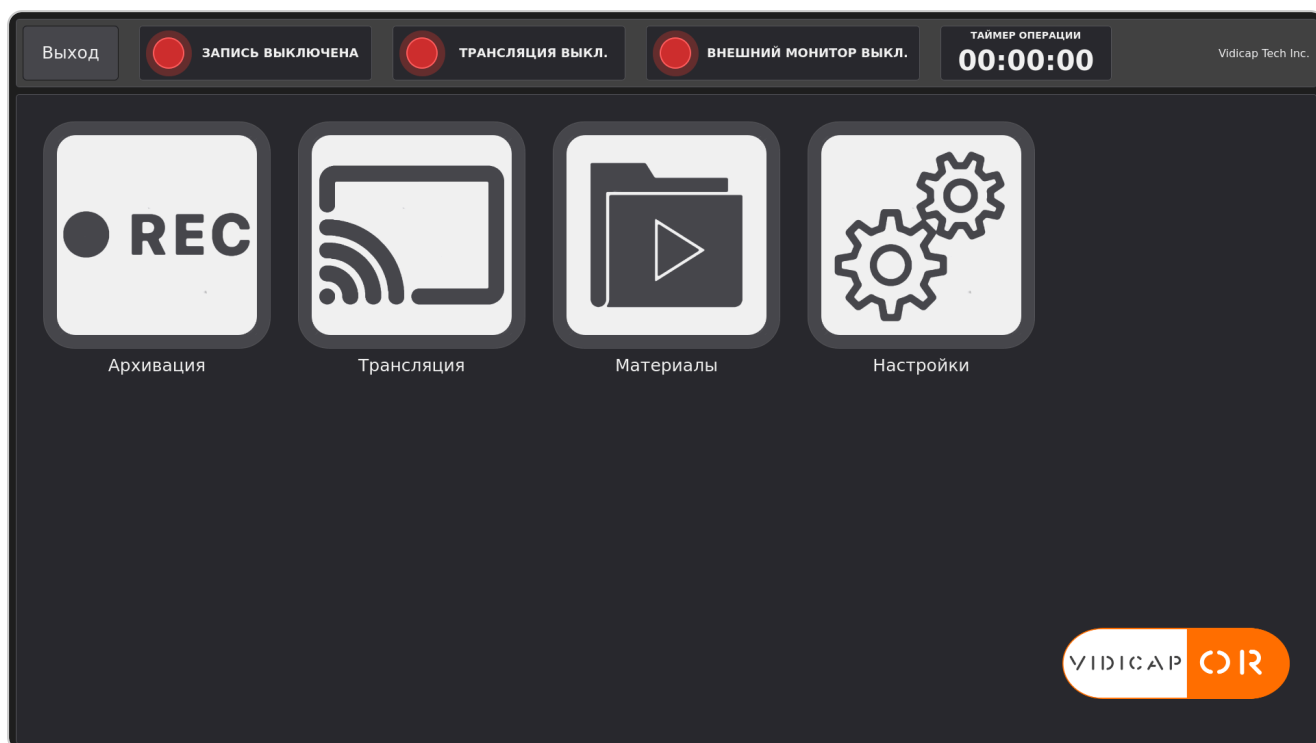





Vidicap Touch 1.0

1. В главном меню нажмите **«Настройки»**.
2. Слева, в группе «Вид», нажмите **«Оформление»**.
3. Нажмите **«Vidicap OR»** или **«Исходное»**. Выбранная кнопка выделена цветом.

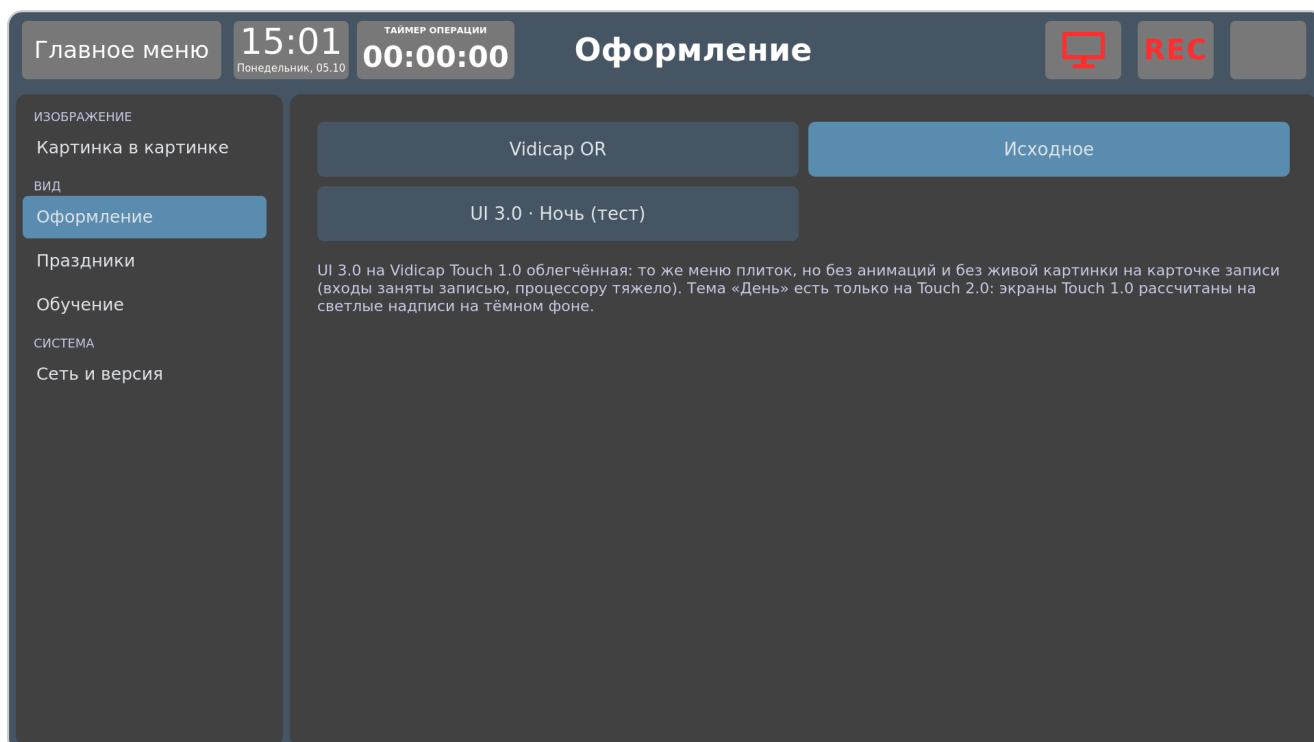

На Touch 1.0 оформление меняет цвета главного меню, шапки и новых экранов (таймер, вход по RFID-меткам, экраны доп. модулей в базовой программе). Остальные экраны программы и так в исходных цветах.

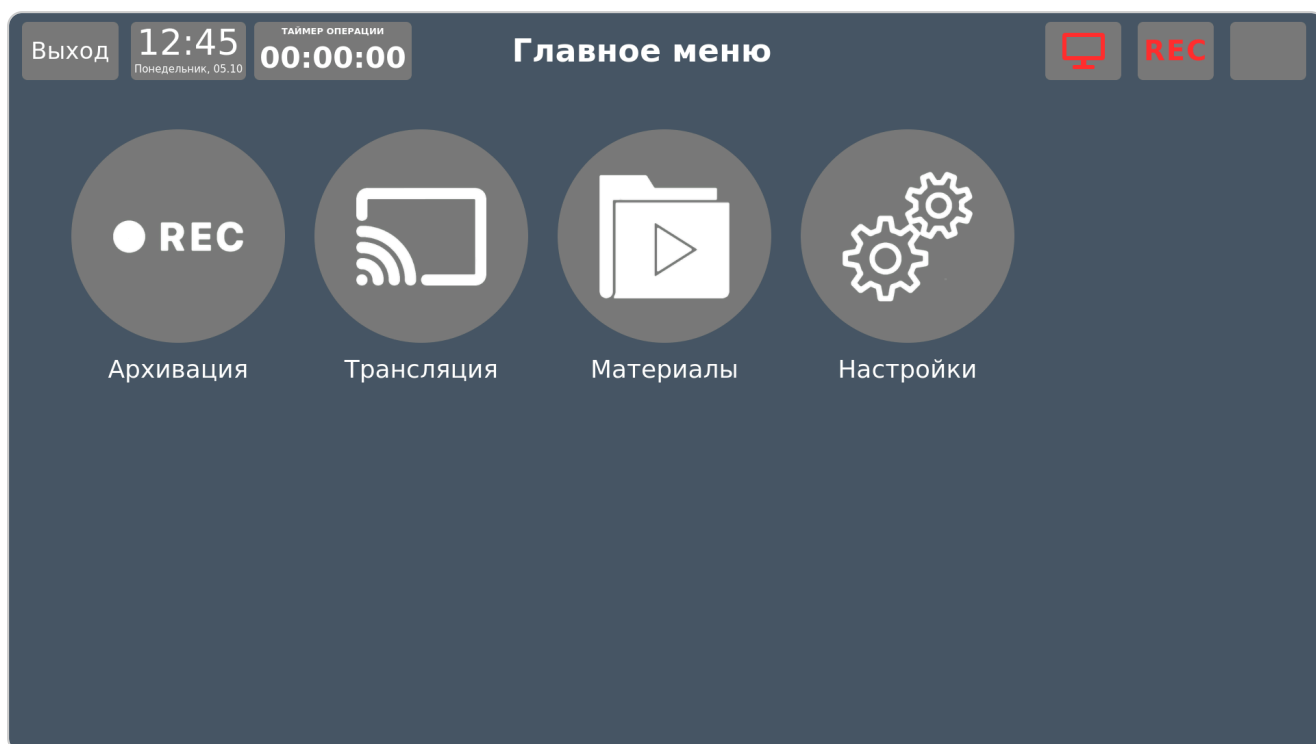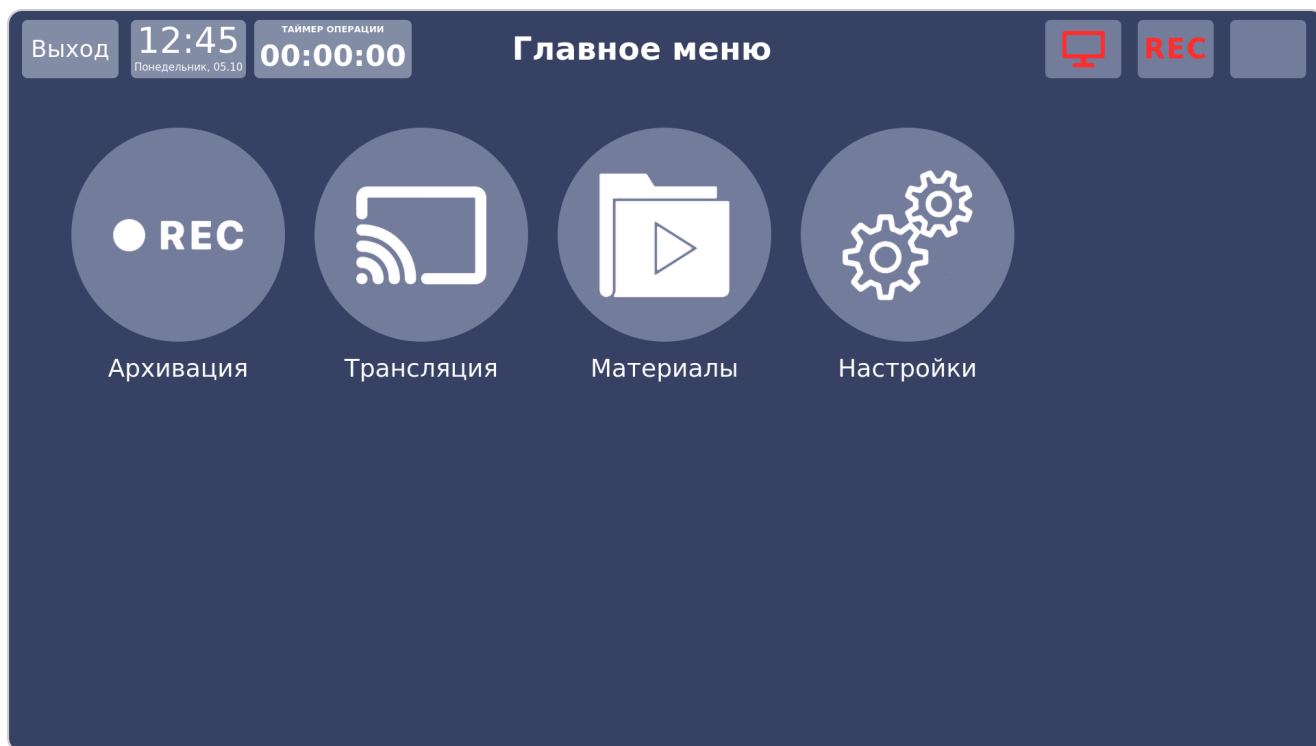

Vidicap UI 3.0 (тест)



Новый вид экрана, пока в тестовом режиме. Вернуть прежний можно в любой момент там же, в «Оформлении», одним нажатием.



- **Две темы под свет в зале.** «Ночь» — почти чёрный графит: не слепит в затемнённой эндоскопической. «День» — тёплый светлый серый (не белый, без бликов) для работы под операционными лампами.



- **Новое главное меню.** Слева крупная карточка «Запись»: идёт ли запись и сколько, вставлена ли флешка, идёт ли трансляция. Нажатие открывает экран записи. Справа плитки по четыре в ряд; на каждой плитке линейный значок в мягком квадрате цвета оформления. Если плиток больше восьми, они листаются (точки под плитками можно нажимать).
- **Плитки показывают, что внутри.** «Трансляция»: в эфире или выключена (зелёная точка, когда в эфире). «Показатели пациента»: ЧСС и SpO₂ крупно, как на мониторе; старые значения бледнеют. «Маршрутизация видео»: модель коммутатора и есть ли связь. «ИИ-эндоскопия» и «ИИ-УЗИ»: выбранная модель. «Хирургический свет»: включён или выключен. «Музыка»: что играет. «Хирургический стол»: высота и наклон, или «Движется». «Инсуффлятор»: давление в полости и заданное, мм рт. ст. «Эндоскопическая камера»: режим изображения и стоп-кадр. «Внешний дисплей»: что на нём (вход, два входа, показатели, фото) и идёт ли SRT. «Инженерия зала»: температура, влажность и включённая сцена, а при тревоге — её название. «Просмотр DICOM»: сколько исследований открыто. «VR (тест)»: идёт ли показ в шлеме. «Материалы»: вставлена ли флешка. «Управление Камерой»: на связи ли камера. Если связи с прибором нет, давление выше заданного или в зале тревога, строка на плитке красная. На карточке записи живая картинка выбранного входа и время записи.
- **Быстрые кнопки на плитках.** Самое частое можно сделать, не открывая модуль: на «Хирургическом свете» кнопки — и + (яркость), на «Музыке» «Пауза» / «Играть», на карточке записи во время записи «Снимок» и «Стоп». Кнопки крупные, 88 точек (около 22 мм), чтобы попадать в перчатке. Нажатие на свободное место плитки, как и раньше, открывает модуль.
- **Удержание для того, что нельзя отменить.** «Стоп» записи и «Включить» свет срабатывают, только если держать кнопку около секунды: кнопка заполняется цветом и срабатывает, когда заполнится. Короткое нажатие ничего не делает и только пишет «Удерживайте». Окно «Вы уверены?» нет.
- **Экраны доп. модулей в цветах темы.** Свет, стол, инсуффлятор, камера, внешний дисплей, «Инженерия зала» и остальные модули открываются в тех же тёмно-графитовых цветах с оранжевым, что и меню. При возврате к «Vidicap OR» или «Исходному» они снова в прежних цветах.
- **Строка состояния.** Запись, трансляция и внешний монитор показаны «таблетками»: серая точка — выключено, красная пульсирующая — идёт запись, зелёная — включено.
- **Восемь оформлений.** Vidicap (оранжевый), Янтарь, Бирюза, Океан, Индиго, Аметист, Роза, Графит. Фон, плитки и кнопки подбираются под выбранный цвет сами; на «Дне» цвет затемняется, чтобы подписи читались. Красного и зелёного среди оформлений нет: ими показываются запись, тревоги и эфир. Логотип Vidicap остаётся оранжевым.
- **Для зала или для себя.** «Для всего зала» — оформление этого устройства. «Только для меня» доступно, когда вы вошли по RFID-метке: ваше оформление включается при входе и пропадает при выходе.
- **Обучение.** Сразу после выбора темы Vidicap предлагает обучение «Новый интерфейс UI 3.0» на две минуты, с тренировкой удержания кнопки. Подробно: инструкция «Обучение на экране Vidicap».



Как включить на Touch 2.0

1. «Настройки» → «Оформление».
2. Нажмите «**Vidicap UI 3.0 · Ночь (тест)**» или «**Vidicap UI 3.0 · День (тест)**».
Ниже появится выбор оформления.
3. Нажмите карточку оформления. Каждая карточка нарисована в своих цветах.
Если нужно только для себя, сначала войдите по метке и нажмите «Только для меня».

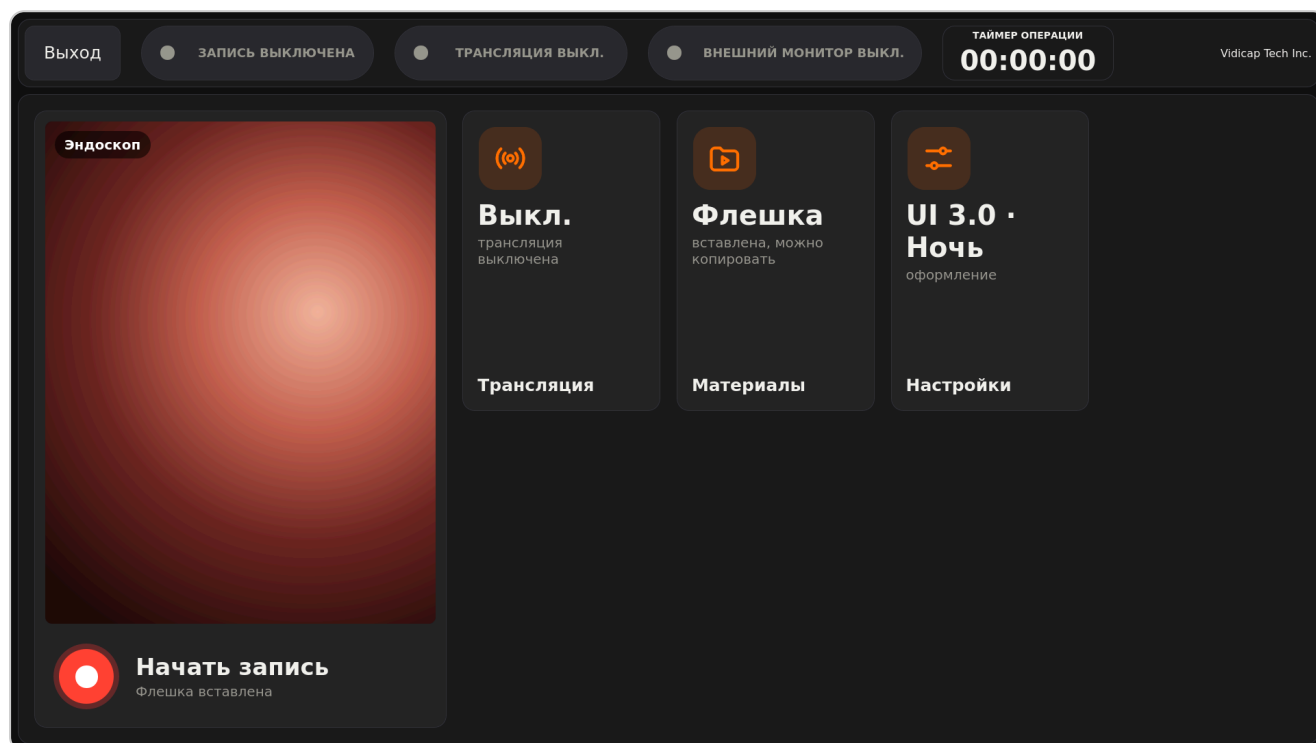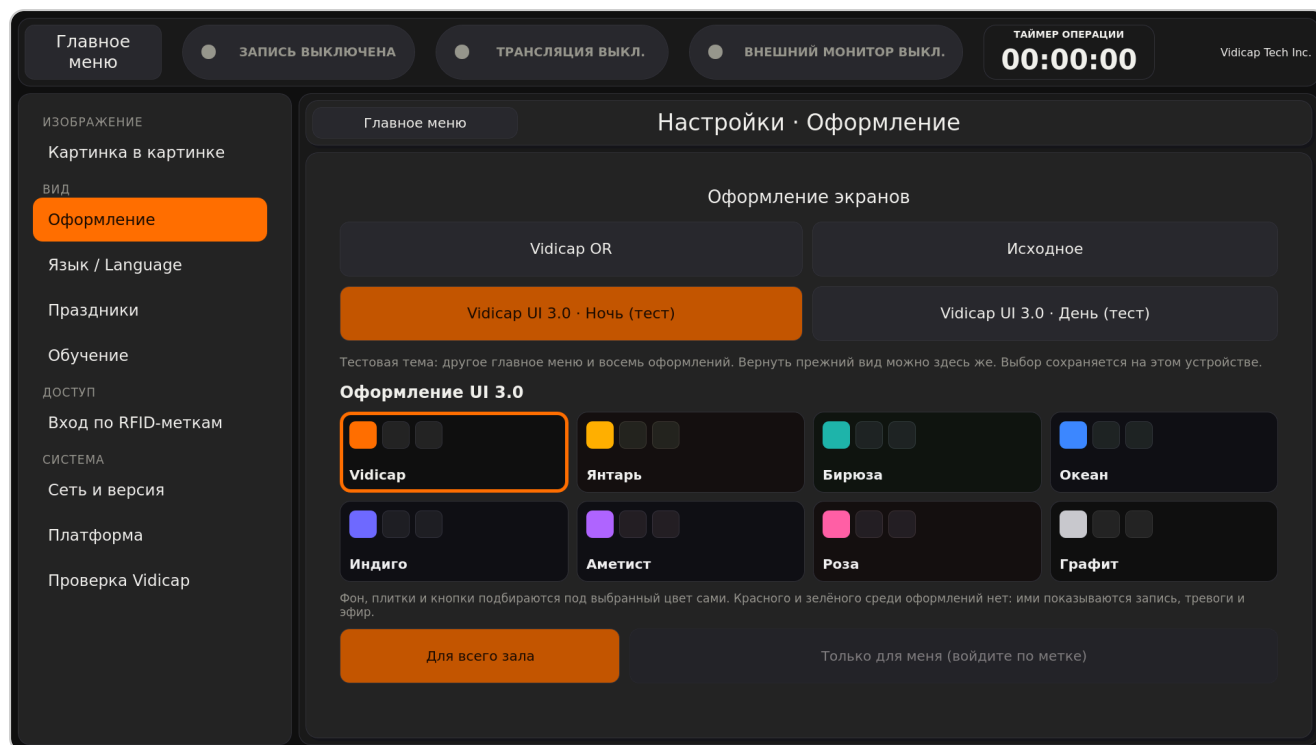

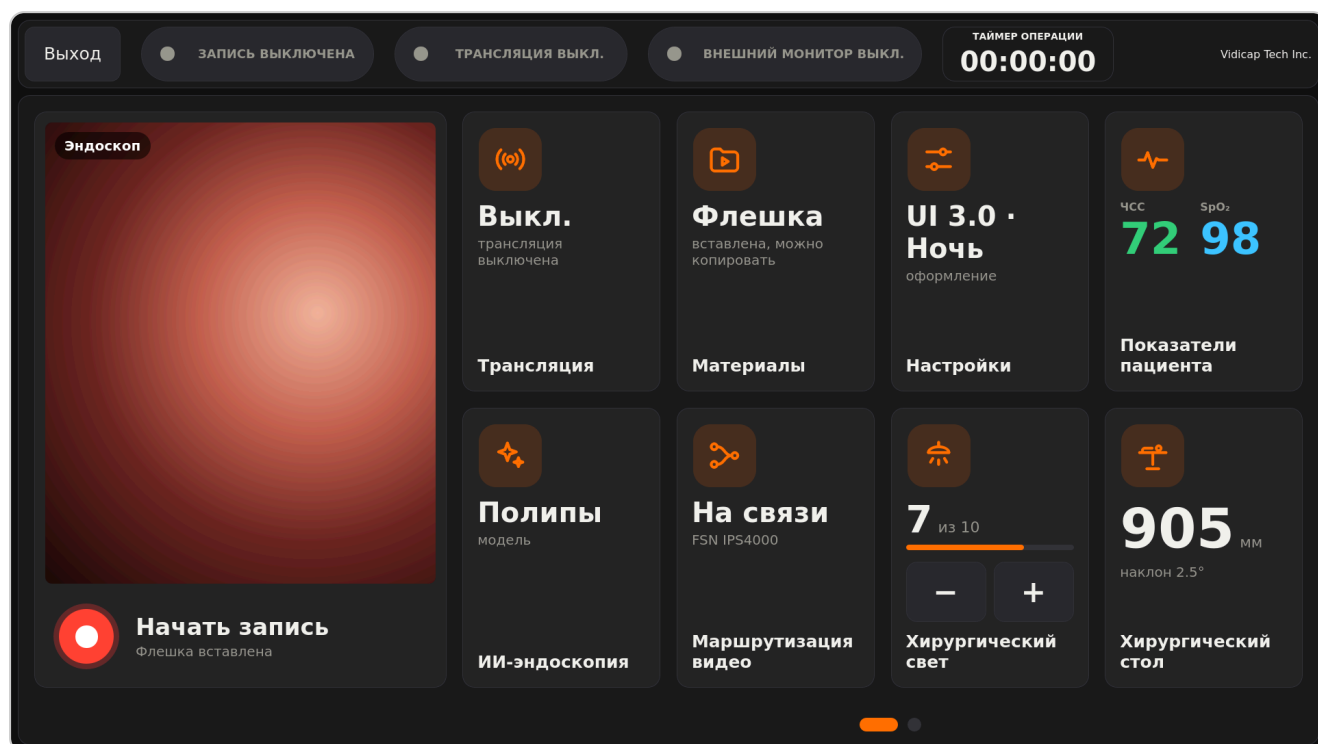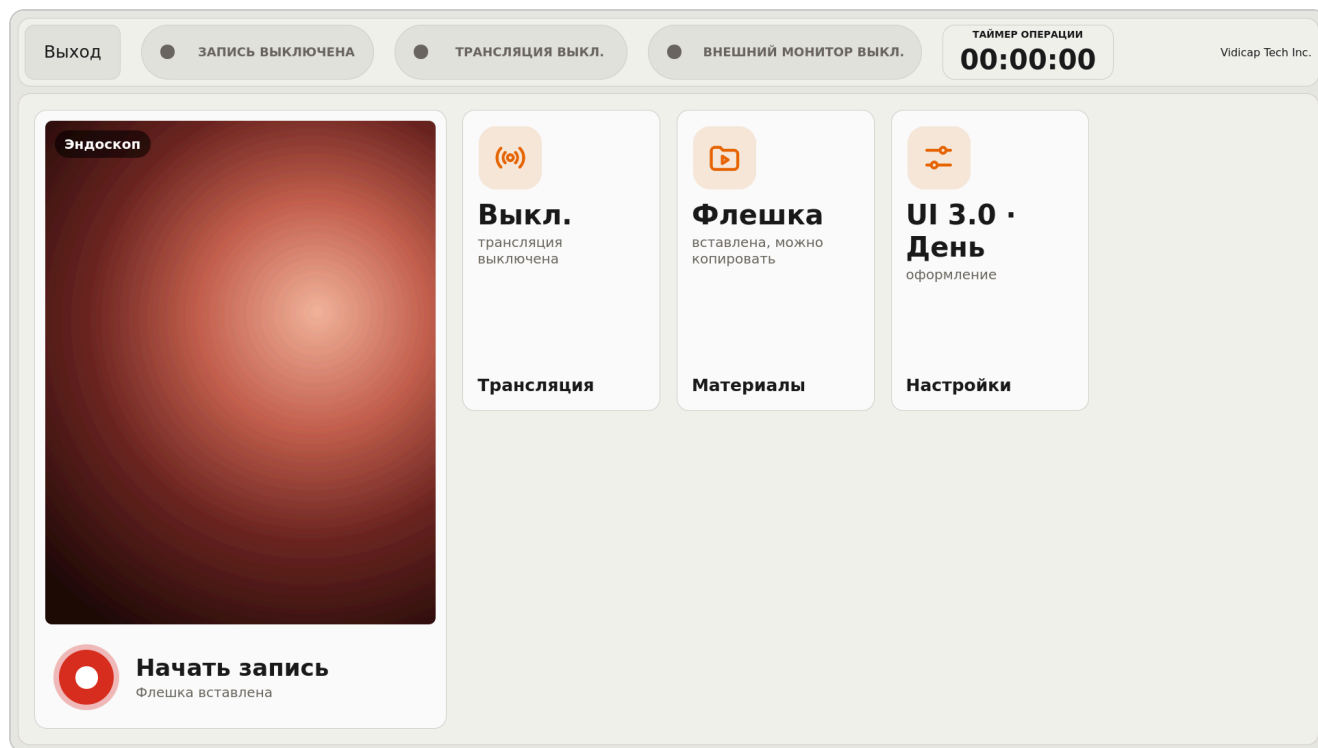

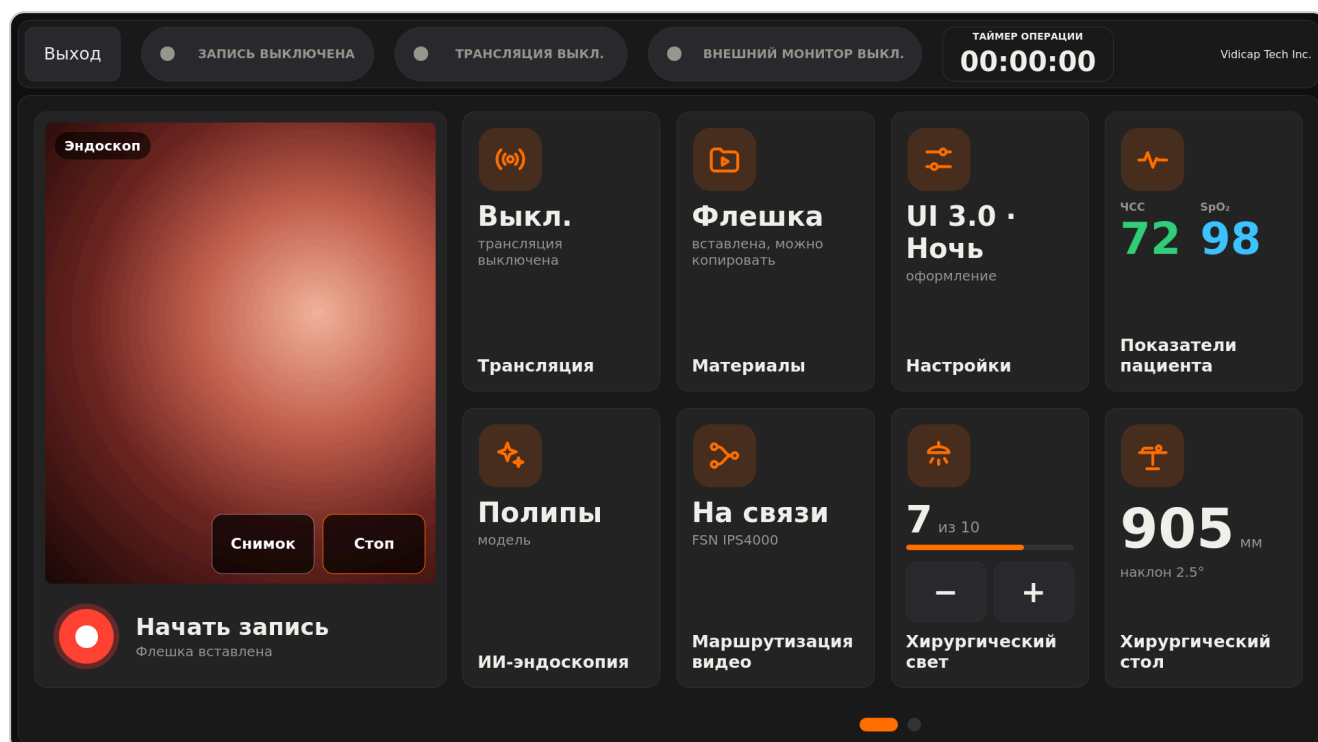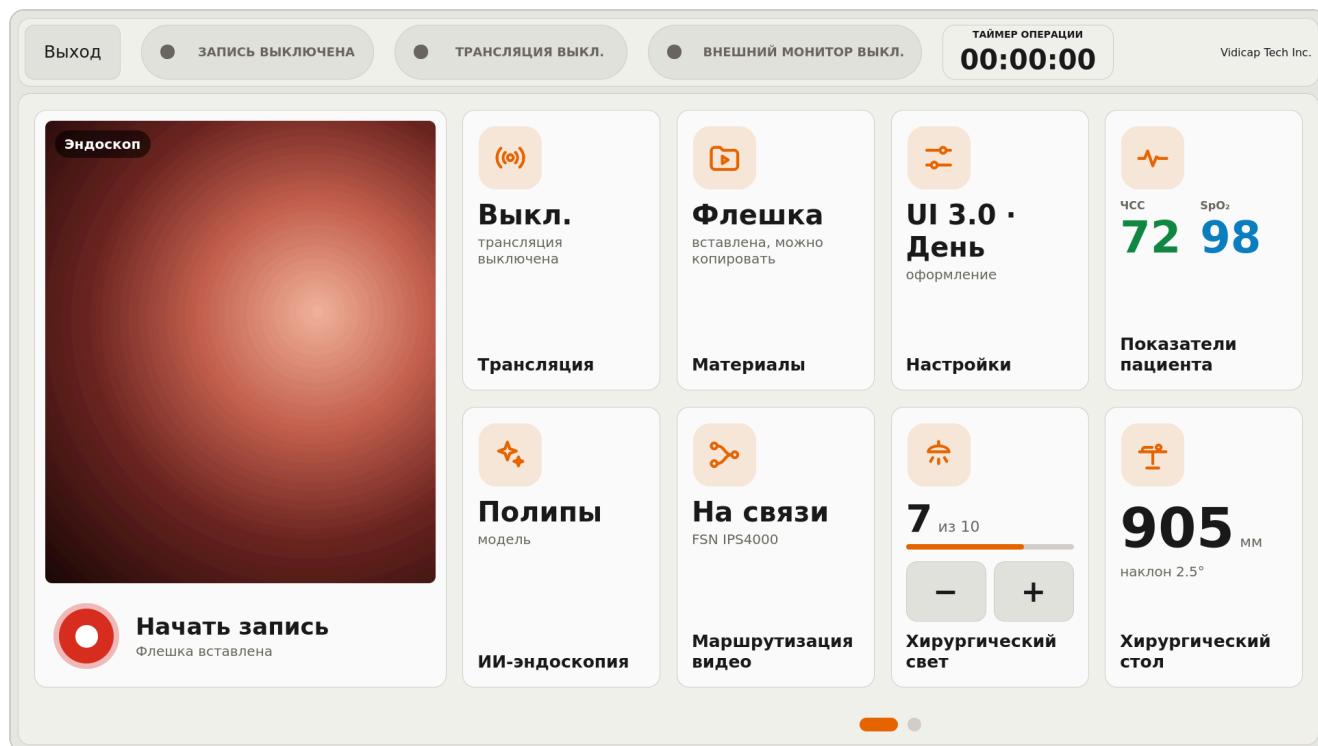

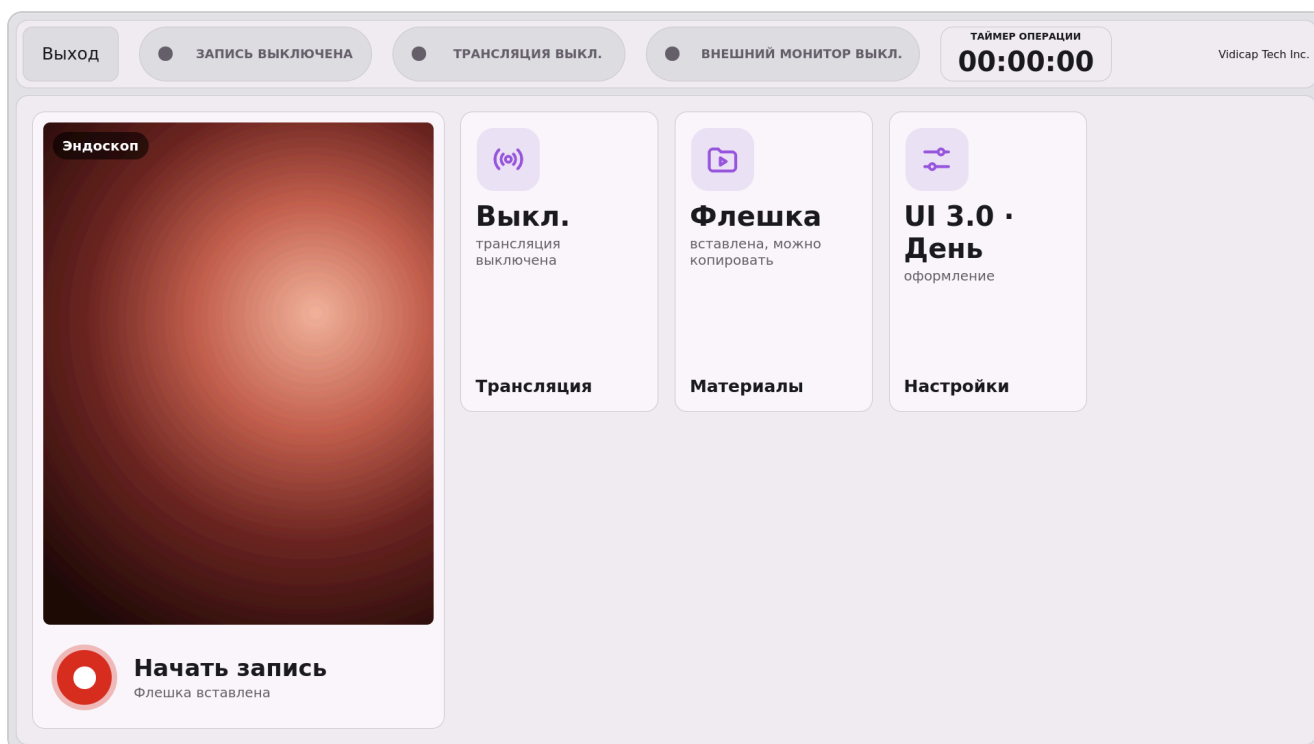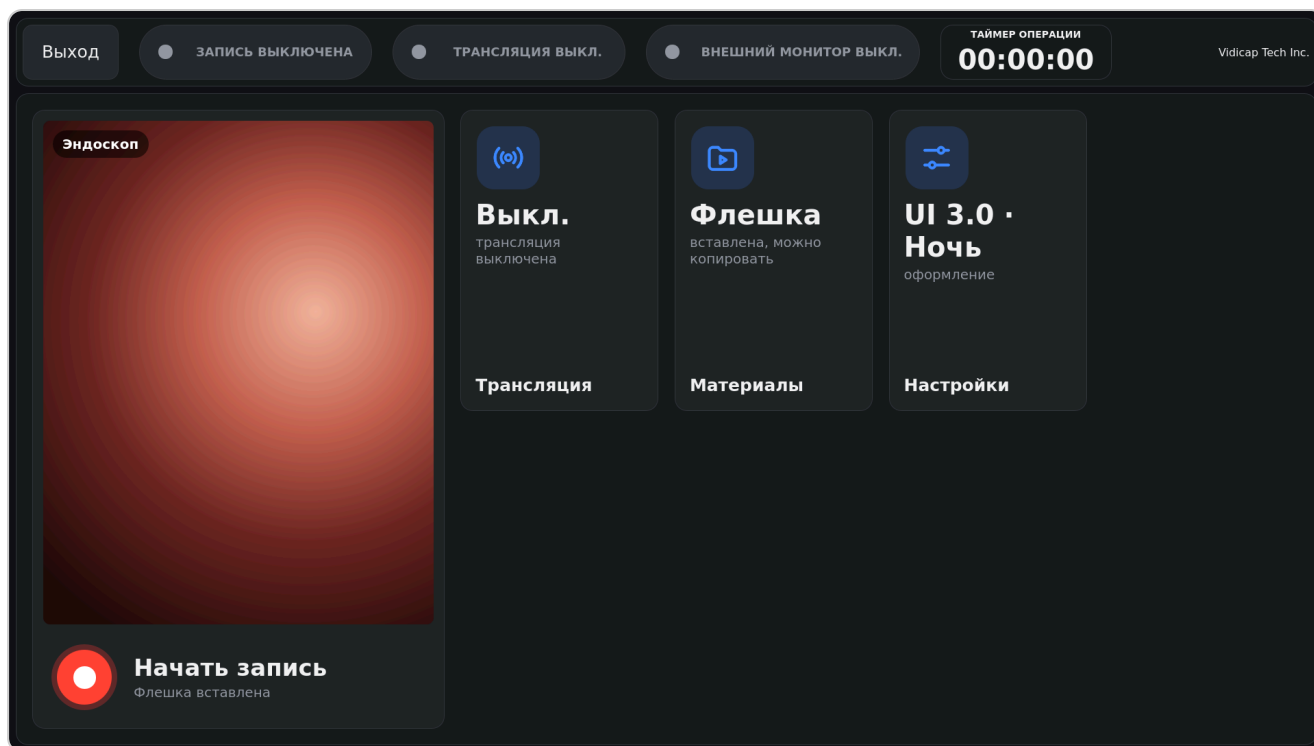

Touch 1.0: облегчённая «Ночь»


На Touch 1.0 есть **«UI 3.0 · Ночь (тест)»**: «Настройки» → «Оформление». Можно выбрать любой из трёх видов: **«Vidicap OR»**, **«Исходное»** или этот тест; вернуться можно в любой момент там же.



В тесте главное меню такое же, как на Touch 2.0: слева карточка записи, справа плитки по восемь на странице (листаются пальцем или точками), на плитках то, что внутри, и те же быстрые кнопки (– и + у света, пауза у музыки, «Включить» свет удержанием). Отличия от Touch 2.0 и почему:



- **Нет живой картинки на карточке записи.** Входы видео на Touch 1.0 заняты записью и трансляцией, а слабый процессор начал бы терять кадры. Вместо картинки на карточке крупно время записи, видно с операционного стола. Картинка входа есть, как и раньше, на странице «Архивация».
- **Нет «Снимка» и «Стопа» на карточке.** На Touch 1.0 запись и снимки делает страница «Архивация»; карточка открывает её одним нажатием.
- **Без анимаций и без выбора восьми оформлений,** чтобы не нагружать устройство.
- **Темы «День» нет:** многие экраны программы 1.0 рассчитаны на светлые надписи на тёмном фоне и на светлом стали бы нечитаемыми.


Плитки доп. модулей на Touch 1.0 показывают то же, что на Touch 2.0, крупно посередине плитки (высоту стола, давление инсуффлятора, режим камеры, температуру в зале и т. д.), а экраны модулей открываются в цветах темы. Окно «Обучения» тоже в цветах темы.

Внутренние экраны Touch 1.0 в «UI 3.0 · Ночь» тоже новые: «Архивация», «Трансляция», «Материалы», «Настройки», «Вход по RFID-меткам» и экраны модулей. Тёмные карточки без светлых рамок, серые кнопки со скруглёнными углами, выбранный пункт и главное действие экрана (например, «Начать новое обследование») оранжевые. Кнопка «Главное меню» внутри экрана убрана: она уже есть слева в шапке. Список «Настроек» листается пальцем, если доп. модулей много и пункты не помещаются (полоса справа показывает, что ниже есть ещё).

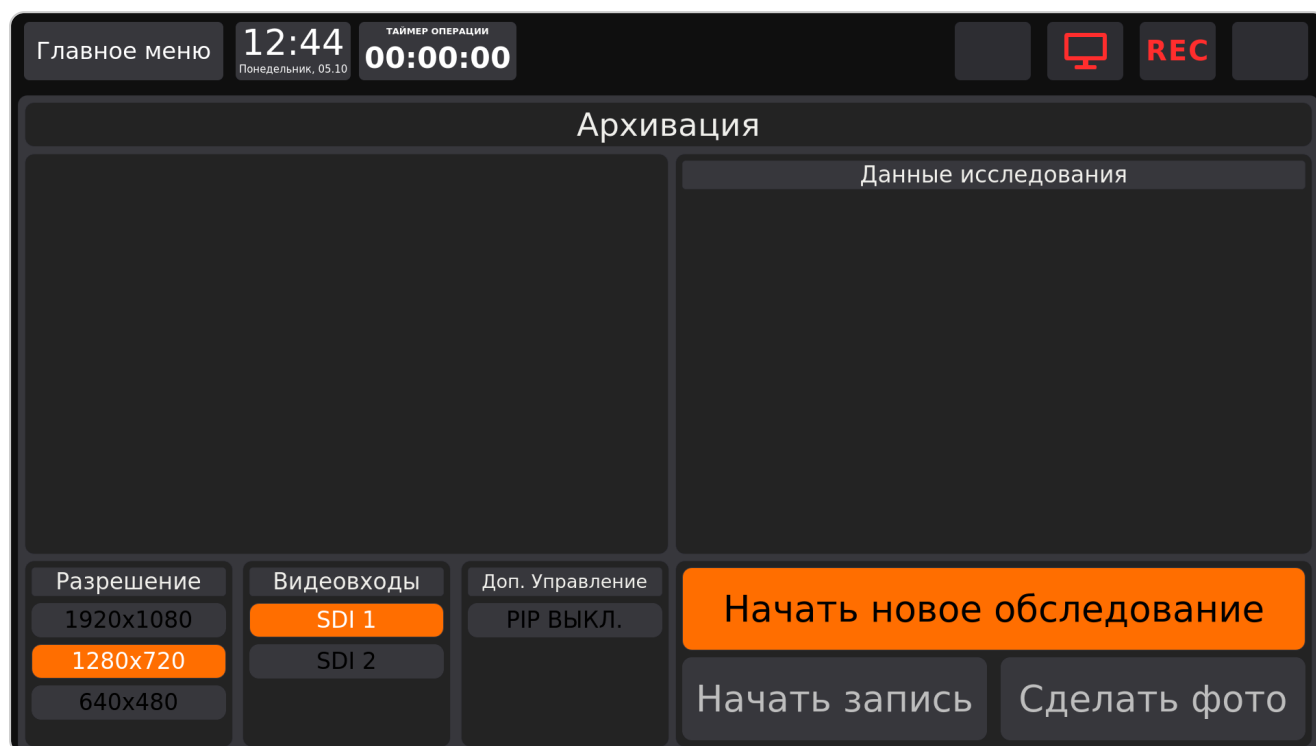

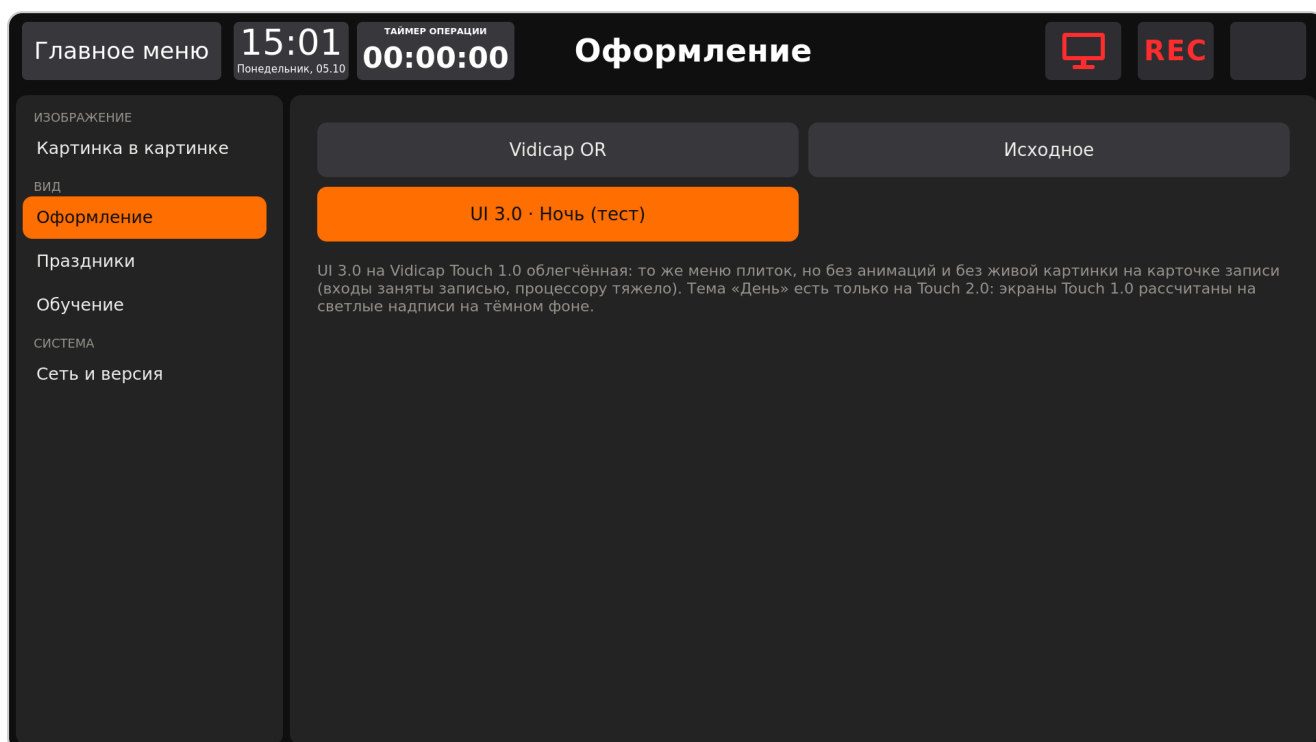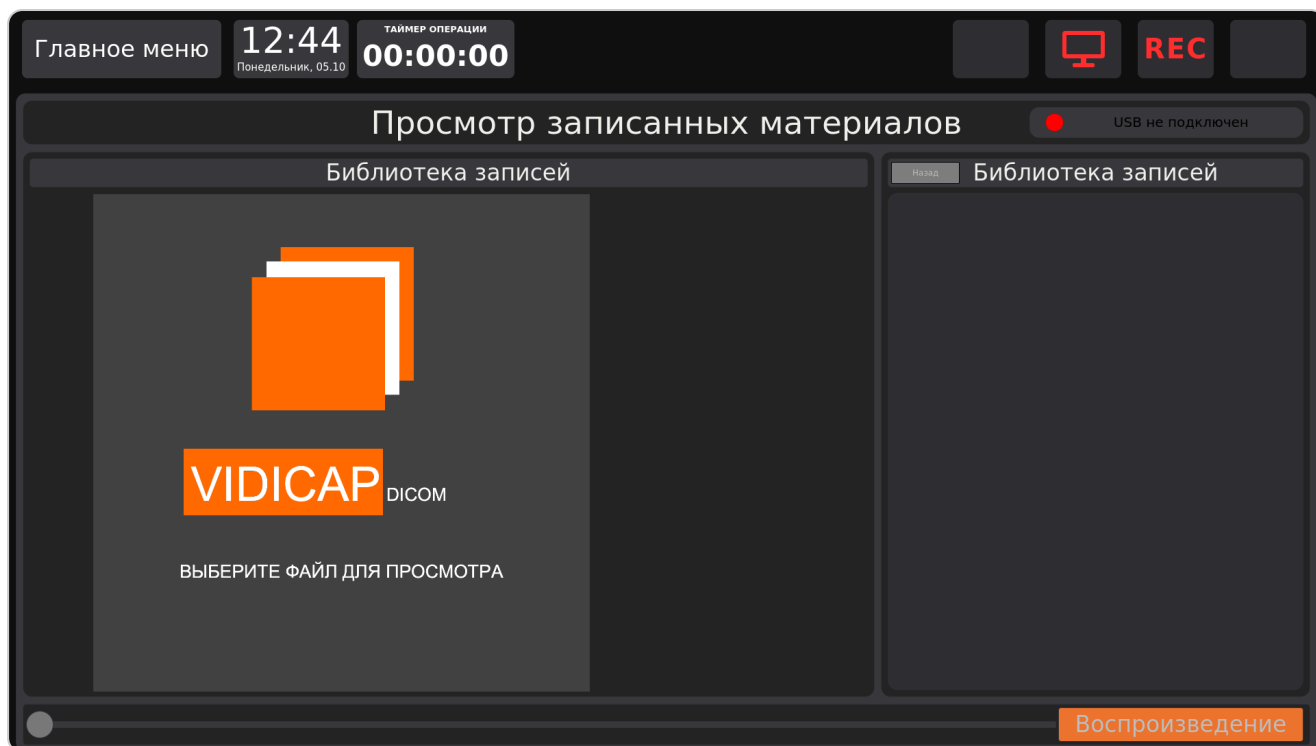

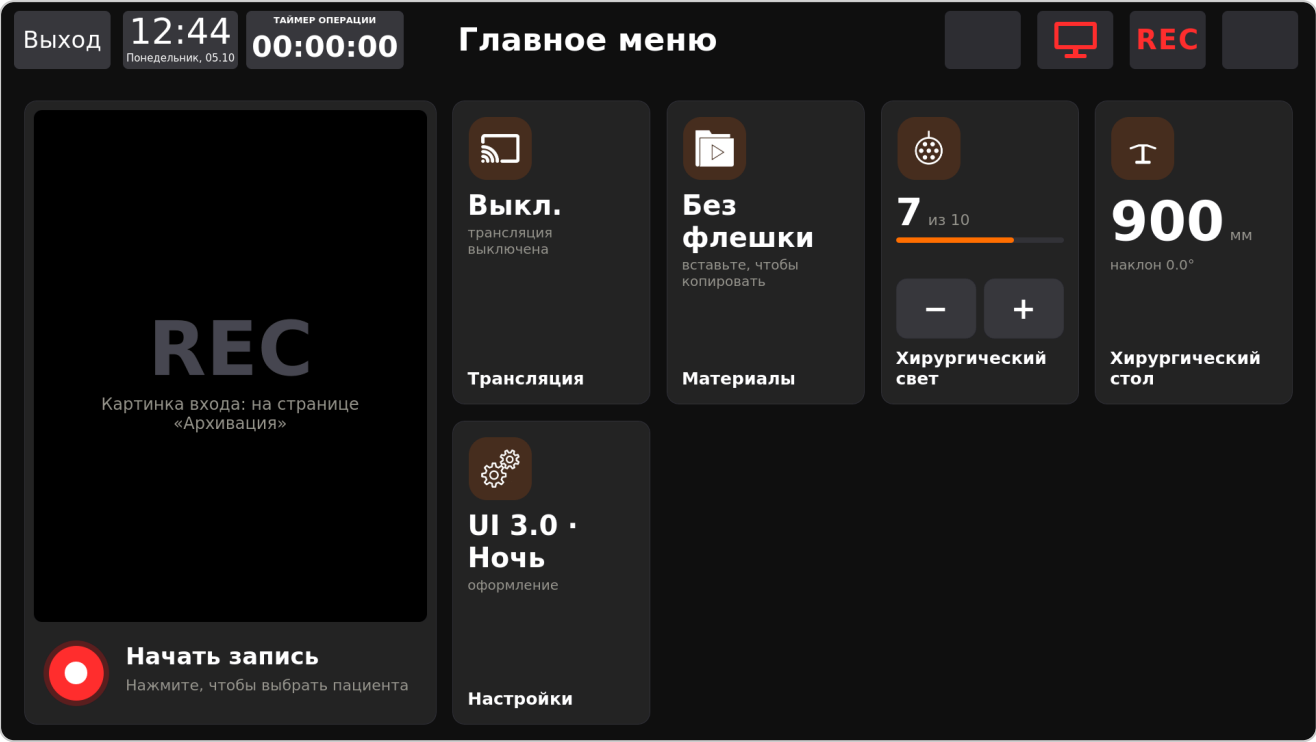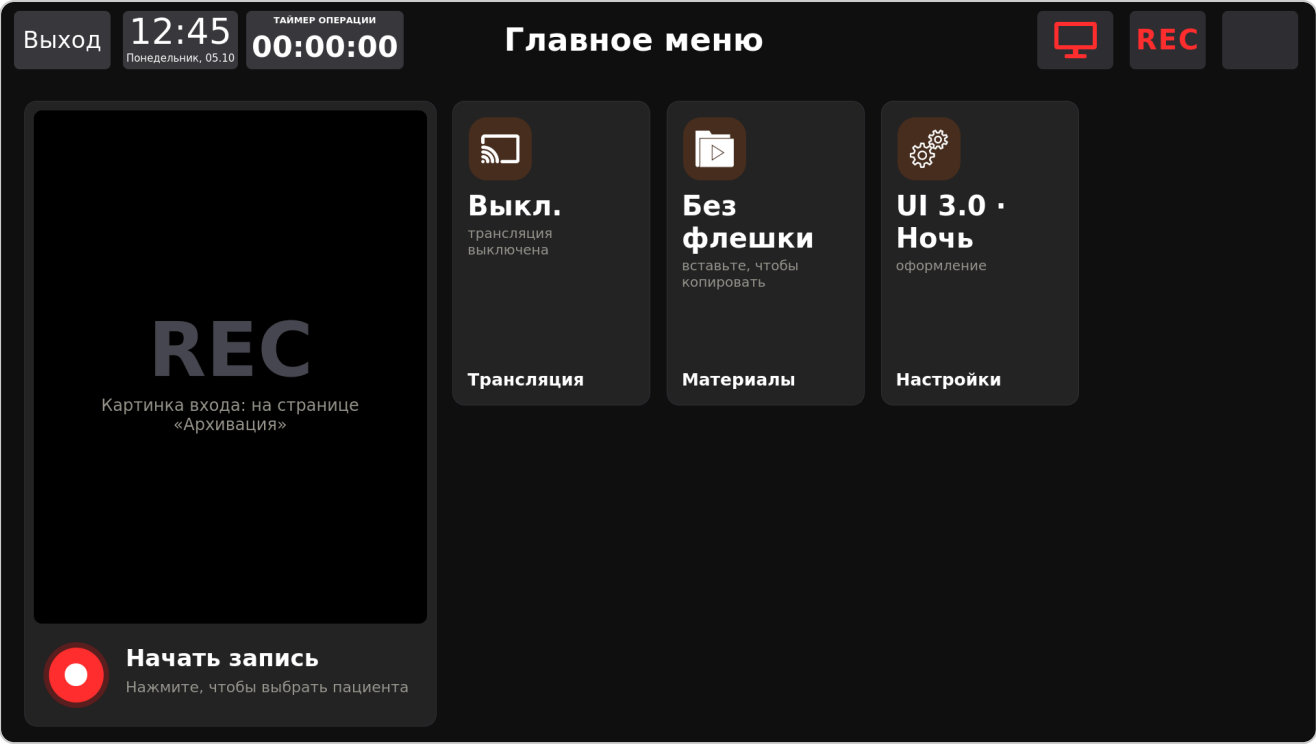

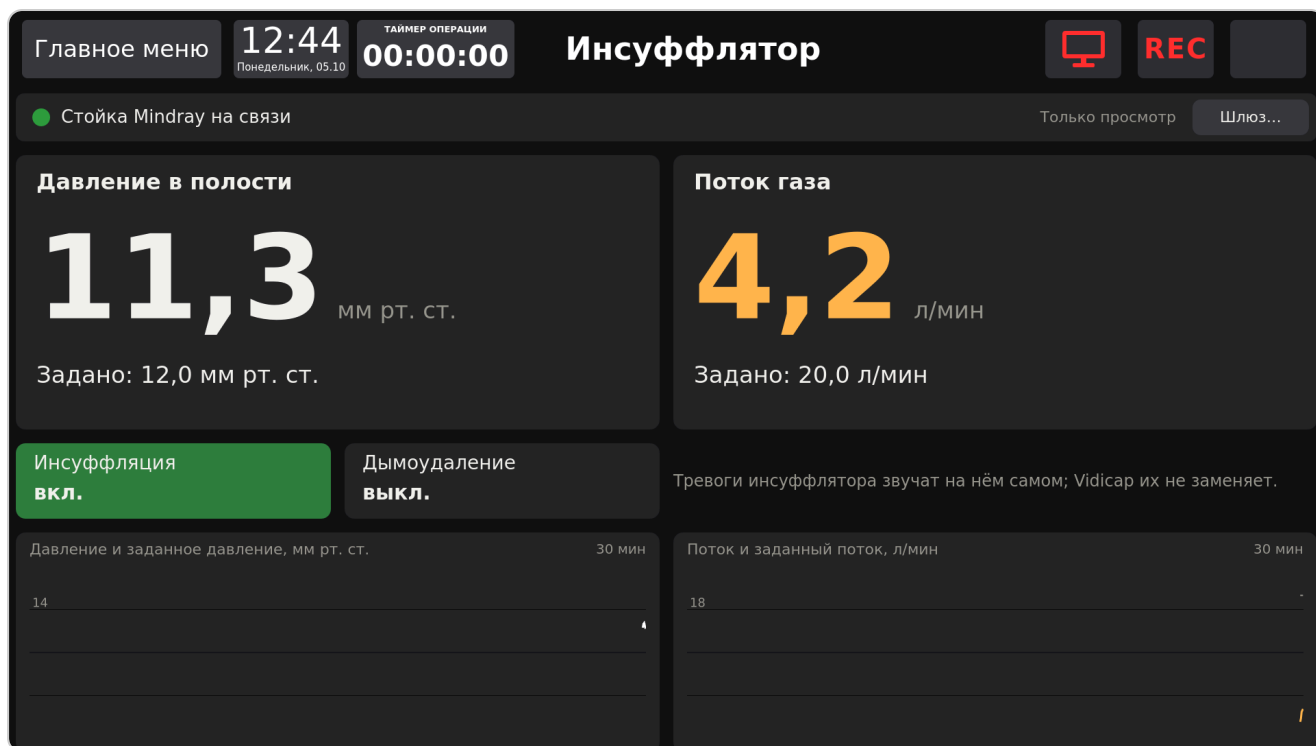

Что важно знать

- **Выбор хранится на самом устройстве** и переживает перезапуск программы и обновления. На другие Vidicar и на платформу он не передаётся. Личное оформление UI 3.0 тоже хранится на этом устройстве.
- **Экраны доп. модулей** (свет, стол, музыка и другие) рисуют сами модули, их цвета оформление не меняет.
- **Эмулятор Vidicar** на платформе показывает тот же пункт «Оформление», так что выбор можно посмотреть без устройства.