



МАНУАЛ

Главное меню: плитки как виджеты

Для Touch 1.0 и 2.0 в оформлении UI 3.0: плитки S, M и L, меню зала от техника, своё меню врача, сколько рядов плиток.

Для врачей, техников и администраторов

09.10.2026

Содержание

Три размера плиток

«Настройки» в верхней панели

Как поменять меню зала (техник)

Своё меню врача

Сколько рядов плиток

Vidicar Touch 1.0


Если что-то не так

В оформлении **UI 3.0** главное меню Vidicap настраивается как экран телефона: каждая плитка бывает маленькой, средней или большой, плитки можно переставить и спрятать. Меню зала расставляет техник; врач или заведующий может собрать своё меню, оно включается, когда он входит по PIN-коду или бейджу.

Ревизия	Что нужно
Vidicap Touch 2.0	версия 2.104.0 и новее
Vidicap Touch 1.0	программа 1.69.0 и новее; английские надписи — агент 1.88.0 и новее

Шестерёнка «Настройки» в верхней панели и кнопки «Отмена» и «Настройки» в правке — с версий **2.106.0** и **1.69.1**.

Обе обновляются с экрана: «Платформа» → «Проверить обновления». Плитки настраиваются только в оформлении UI 3.0 («Настройки» → «Оформление», см. «Оформление экрана»). В оформлениях «Vidicap OR» и «Исходное» меню прежнее.

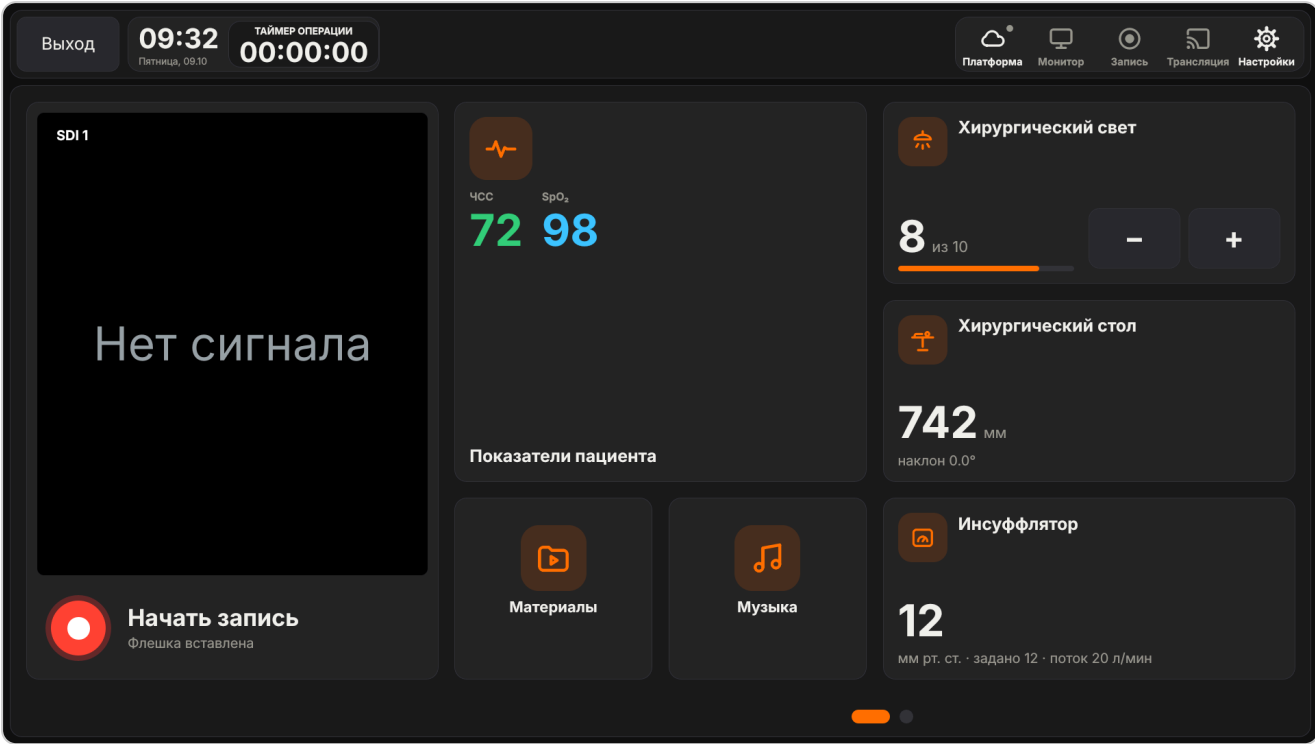


Три размера плиток

- **S** — одна клетка: значок и название. Если у модуля нет связи или тревога, в углу плитки красная точка.
- **M** — две клетки в ширину: значок, название и значение модуля (давление, высота стола, яркость света, что играет), справа — быстрые кнопки, например — и + света.
- **L** — четыре клетки: всё сразу, крупно, как было в первом варианте UI 3.0.

«Настройки» в верхней панели

В UI 3.0 «Настройки» открываются шестерёнкой в верхней панели, рядом с «Платформа», «Монитор», «Запись» и «Трансляция». Она видна на любом экране и никогда не уходит в «...». Поэтому плитки «Настройки» в меню по умолчанию нет. Если в зале привыкли к плитке, техник возвращает её: правка меню → **«Скрытые (N)»** → «Настройки» → **«Вернуть»**.



По умолчанию плитки модулей со значением (свет, стол, показатели пациента, инсуффлятор, музыка и другие) средние, остальные маленькие. Карточка записи слева всегда на месте и не настраивается.

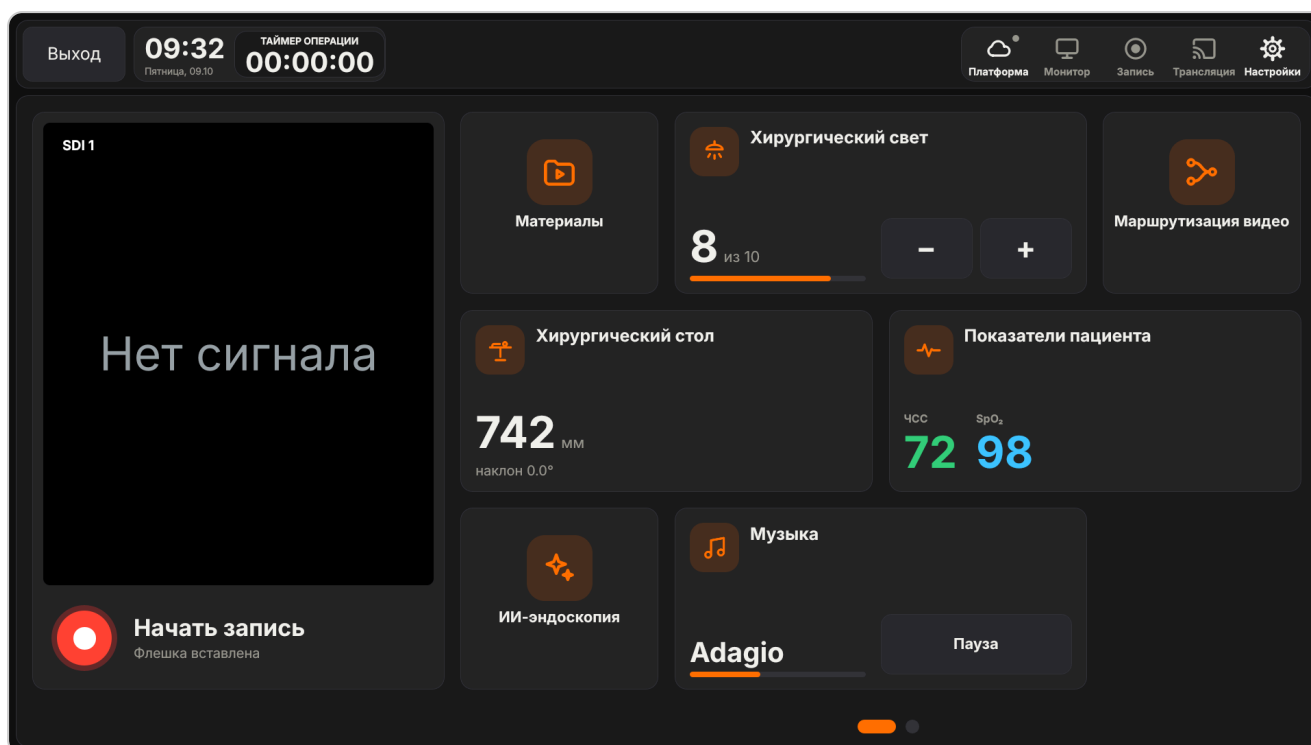

Как поменять меню зала (техник)

1. Войдите как техник (технический вход) или откройте «Настройки», если уровни допуска не включены.
2. Удержите любую плитку главного меню (около секунды) — или «Настройки» → **«Главное меню»** → **«Изменить меню зала»**.
3. Меню переходит в режим правки: плитки в рамках, на каждой её размер, внизу панель **«Меню зала»**.
4. Нажмите плитку, чтобы выбрать её (оранжевая рамка). На панели:
 - < и > — на место раньше или позже; плитка переходит и на другую страницу;
 - **S, M, L** — размер;
 - **«Скрыть»** — убрать плитку из меню. Скрыть можно любую плитку: «Настройки» всегда открываются шестерёнкой в панели.
5. Плитку можно перетащить пальцем на другую — они меняются местами.

6. **«Скрытые (N)»** — список скрытых плиток, у каждой **«Вернуть»** (плитка встаёт в конец меню).
7. **«Сбросить»** — удерживайте, пока кнопка не заполнится: меню зала станет как по умолчанию.
8. **«Готово»** — выйти из правки. Всё сохраняется сразу, на этом Vidicar. Если правку открыли из «Настройки» → «Главное меню», Vidicar вернётся туда. Кнопка **«Настройки»** вверху слева (на месте «Выход») и шестерёнка в панели тоже заканчивают правку и открывают «Настройки» → «Главное меню».
9. **«Отмена»** — выйти из правки и вернуть меню, каким оно было до неё.

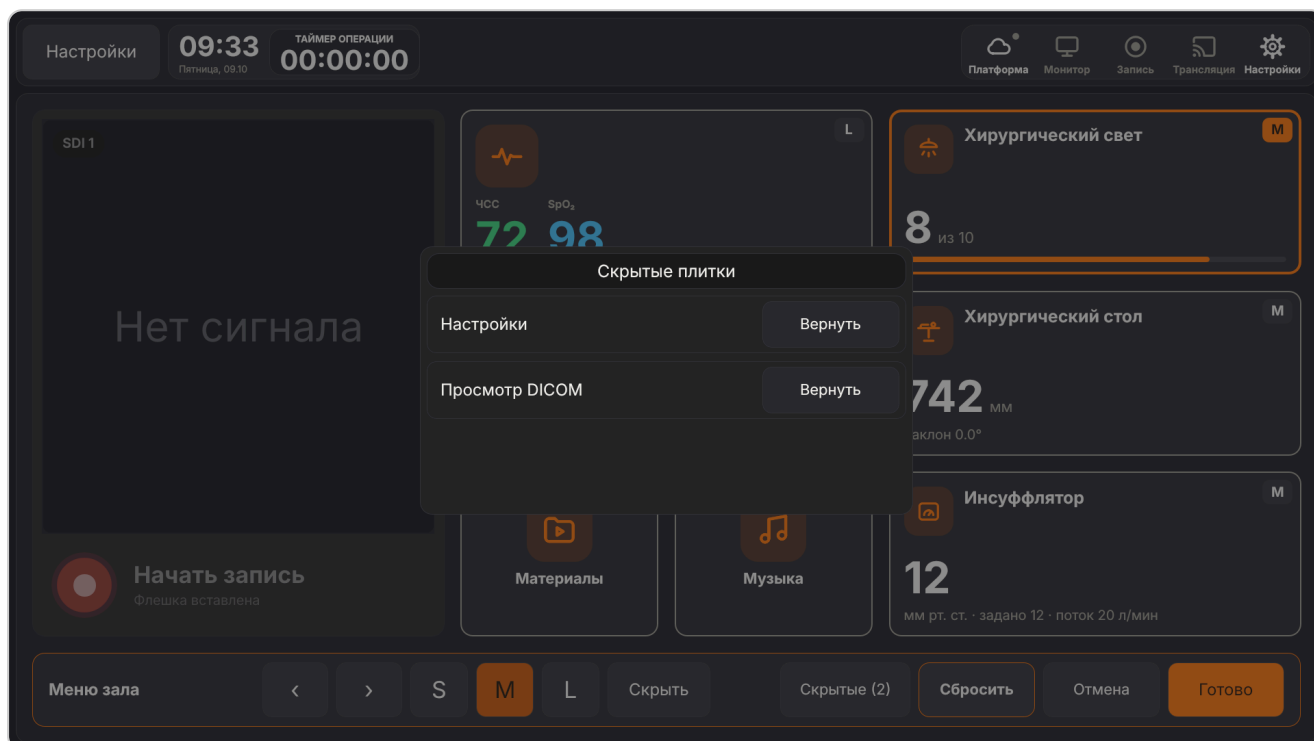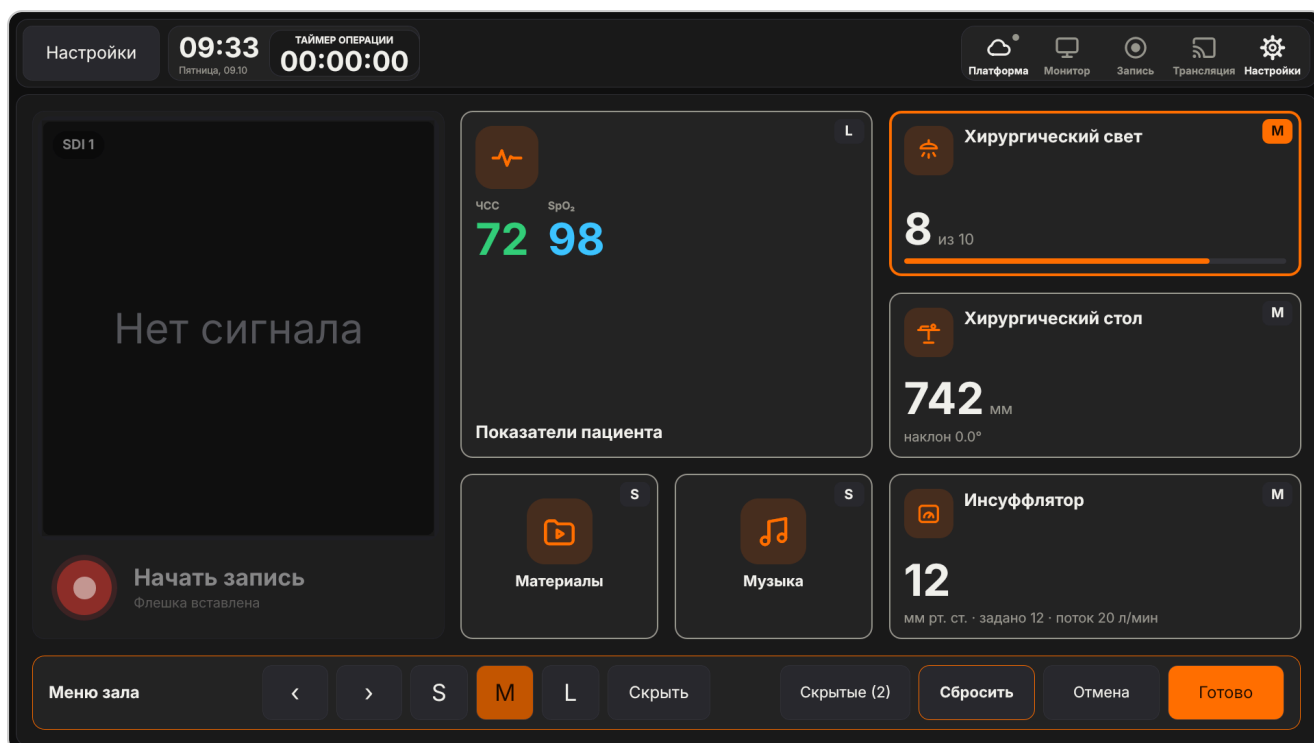

Во время записи и трансляции меню не меняется: Vidicap так и скажет. Если запись началась во время правки, правка закрывается.

Своё меню врача


1. Врач или заведующий входит по PIN-коду или бейджу.
2. Удерживает любую плитку — внизу панель **«Моё меню · Фамилия И. О.»**.
3. Дальше так же, как у техника. «Сбросить» возвращает его к меню зала.

Своё меню включается при входе этого врача и выключается при выходе; остальные видят меню зала. Медсестра и гость меню не меняют: при удержании плитки Vidicap подскажет, что меню зала настраивает техник. Меню хранятся на самом Vidicap и никуда не передаются.

Сколько рядов плиток



Vidicap сам считает ряды по высоте монитора: клетка около 6,5 см, чтобы плитку было видно от операционного стола. На 15,6" — два ряда, на 19–21,5" — три, на 24" и больше — четыре; на большом мониторе плитки просто крупнее. Столбцов столько, сколько квадратных клеток помещается в ширину.


Если монитор не сообщает свой размер, рядов три. Поменять вручную: «Настройки» → «Главное меню» → «Рядов плиток»: «По экрану» (сколько насчитал Vidicap), 2, 3 или 4.

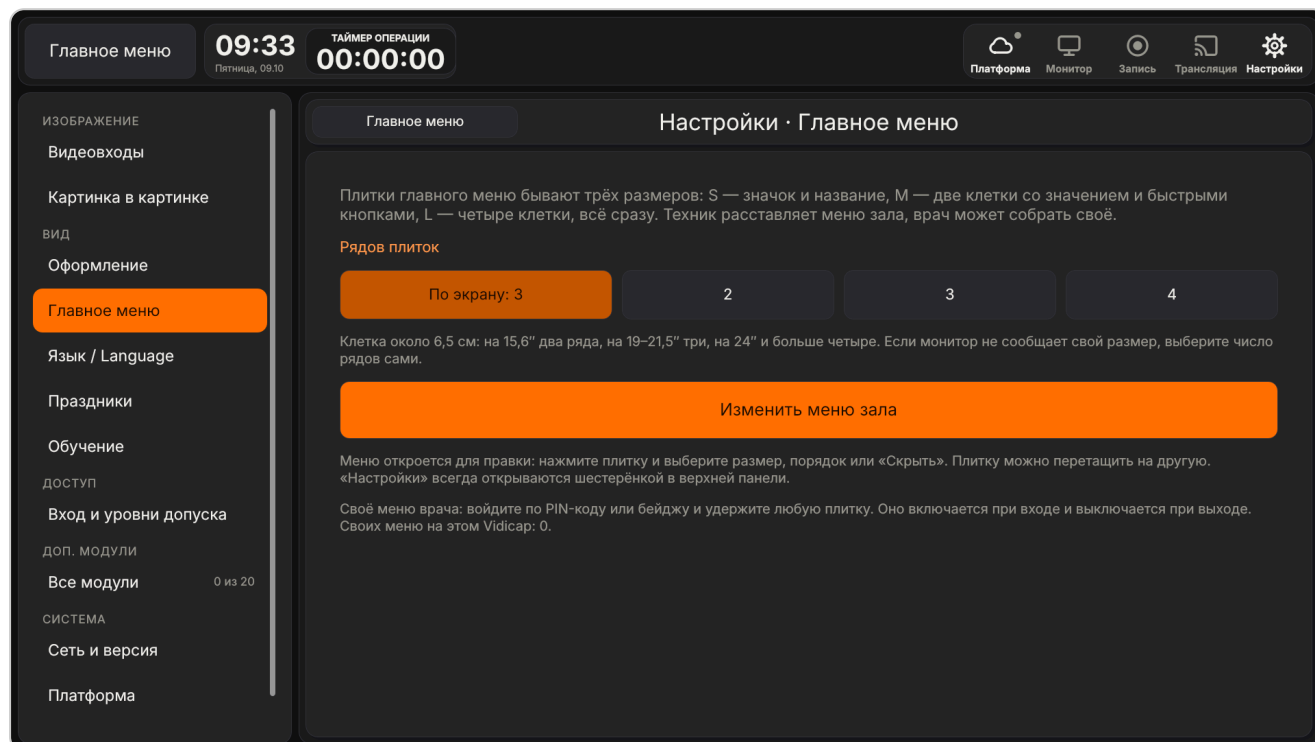

Vidicap Touch 1.0

То же самое: шестерёнка «Настройки» в верхней панели, три размера, удержание плитки, панель правки, «Скрытые», «Сбросить», своё меню врача и «Настройки» → «Главное меню». Как и всё UI 3.0 на Touch 1.0, без анимаций; на карточке записи нет живой картинки.

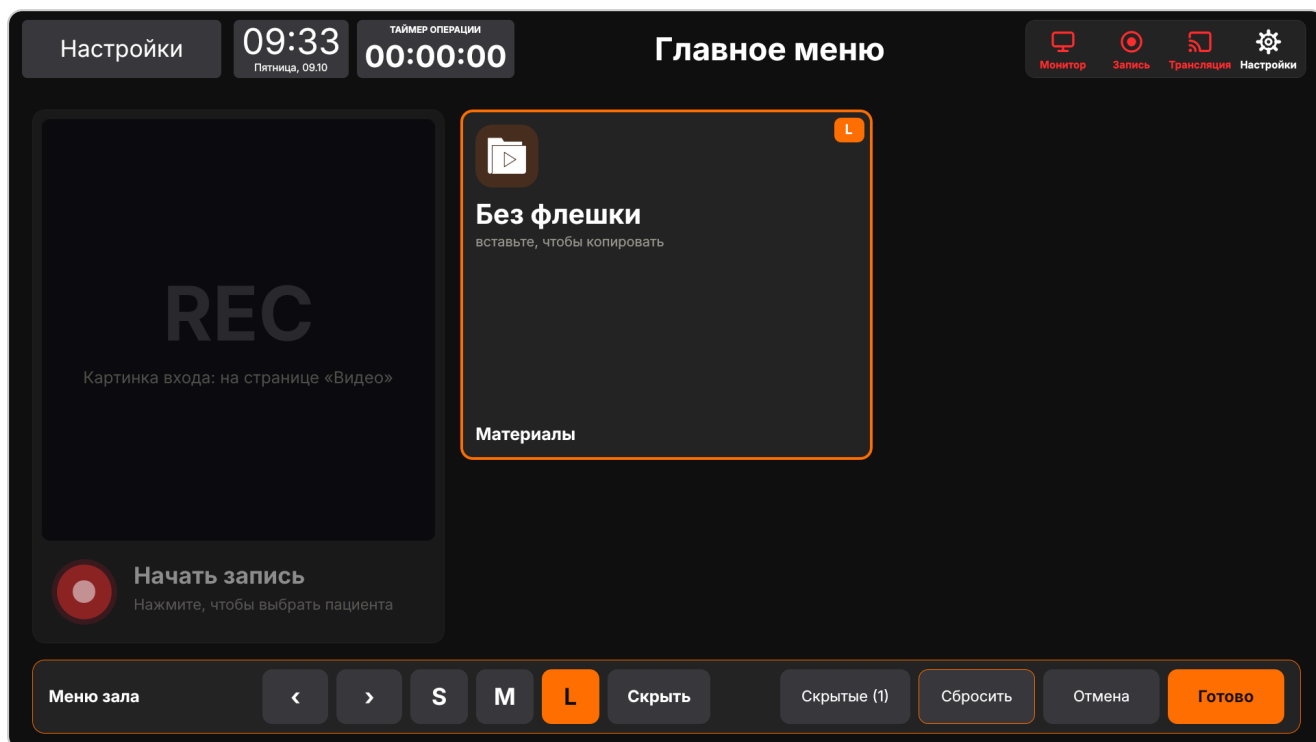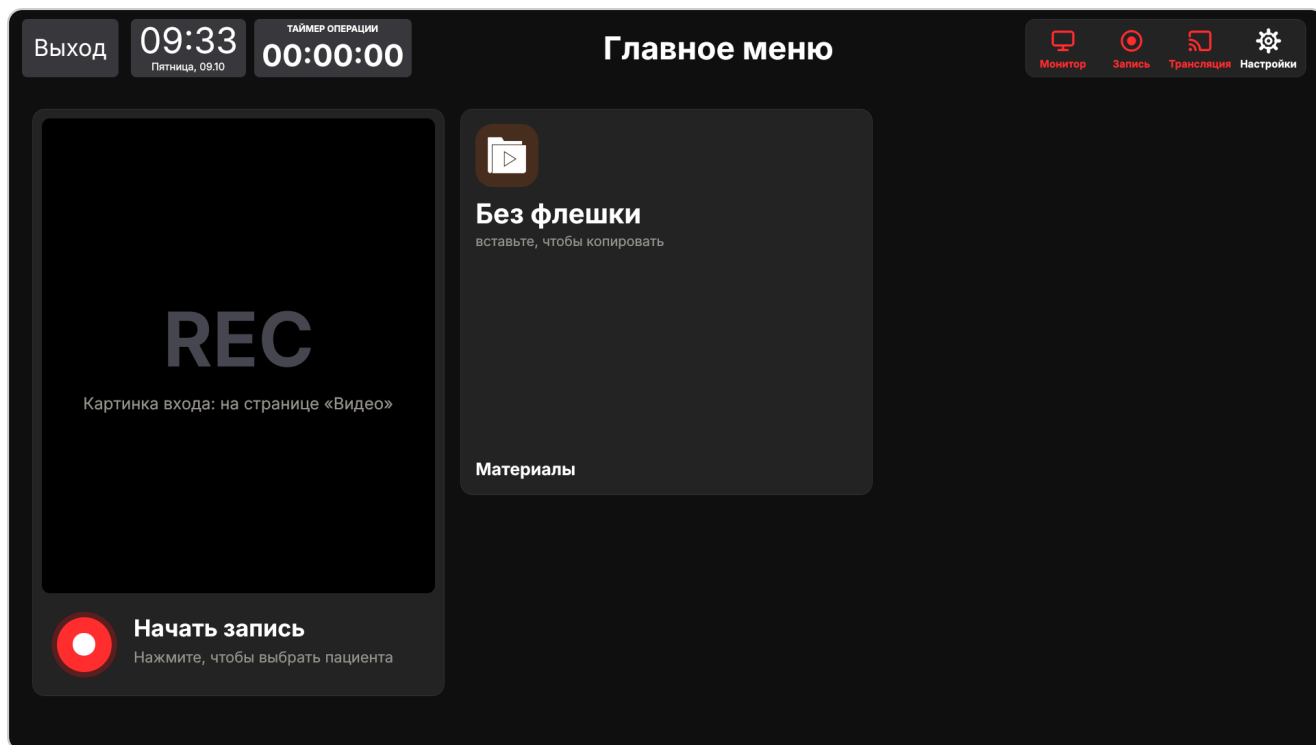

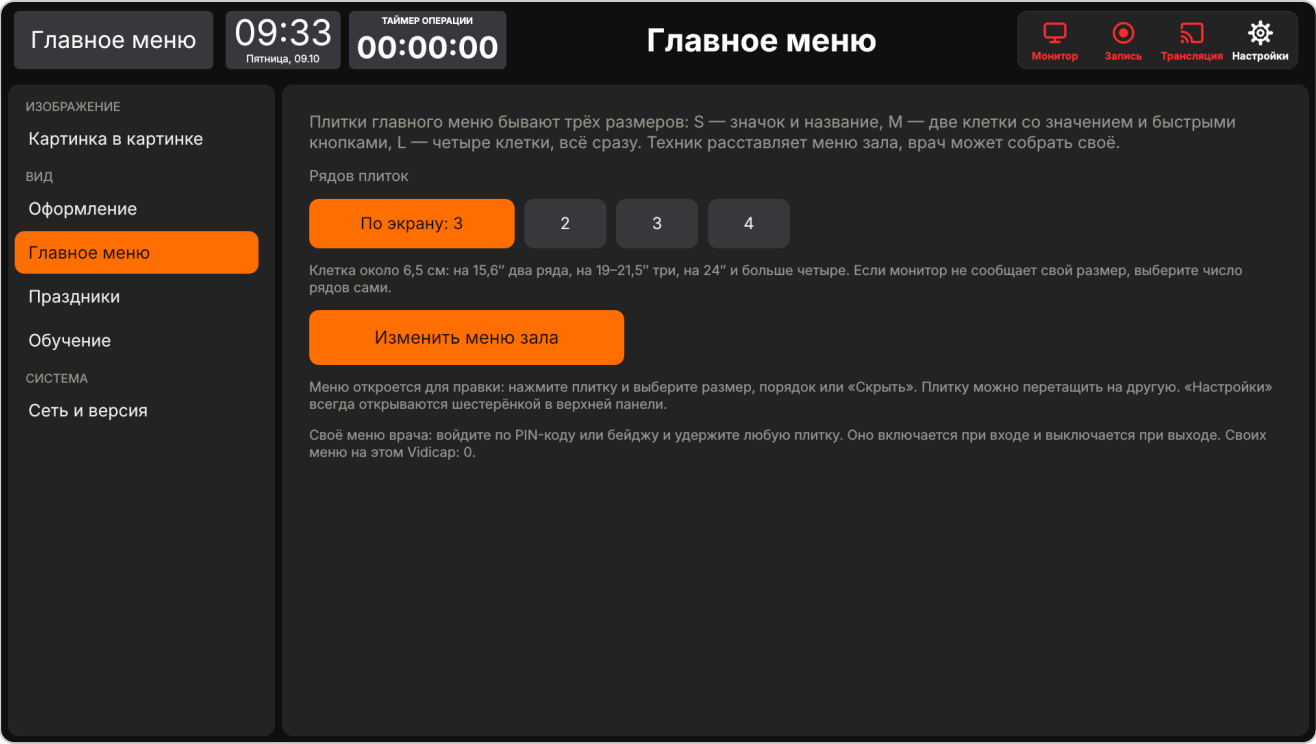

Если что-то не так

Что видно	Что сделать
Удержание плитки ничего не делает	Включите оформление UI 3.0: «Настройки» → «Оформление».
«Меню нельзя менять во время записи и трансляции»	Остановите запись и трансляцию на странице «Видео».
«Меню зала настраивает техник...»	Меню зала меняет техник. Врач собирает своё меню, войдя по PIN-коду или бейджу.
Плитки слишком мелкие или крупные	«Настройки» → «Главное меню» → «Рядов плиток».
Пропала плитка модуля	«Скрытые (N)» на панели правки → «Вернуть». Если модуль удалён, его плитка вернётся на прежнее место после установки.