



МАНУАЛ

Настройки на экране Vidicap

Для Touch 1.0 и 2.0: один экран со списком разделов слева; картинка в картинке на схеме кадра, настройки доп. модулей, сеть и версия.

Для врачей, техников и администраторов

05.10.2026

Содержание

Разделы

Картинка в картинке

Настройки доп. модуля

Оформление, обучение, сеть и версия

«Настройки» — один экран. Слева список разделов по группам, справа открыт выбранный раздел. Настройки доп. модулей открываются здесь же, справа от списка: видно, где вы, и одним нажатием можно перейти в любой другой раздел. Листать экраны больше не нужно, кнопок «Назад» внутри настроек нет.

Ревизия	Что нужно
Vidicap Touch 2.0	версия 2.44.0 и новее
Vidicap Touch 1.0	программа 1.38.0 и новее

Обе обновляются с экрана: «Платформа» → «Проверить обновления».

Разделы


Группа	Раздел	Что там
Изображение	Картинка в картинке	угол и размер малого окна, на схеме кадра
Вид	Оформление	«Vidicap OR», «Исходное», «UI 3.0»
Вид	Язык (только Touch 2.0)	язык интерфейса
Вид	Праздники	праздничное оформление главного меню
Вид	Обучение	пройти подсказки снова
Доступ	Вход по RFID-меткам	метки сотрудников, кто может входить в «Настройки»
Доп. модули	свет, стол, показатели пациента, маршрутизация видео, стойка Mindray (шлюз камеры и инсуффлятора: компьютер или Wine), инженерия зала, голосовой помощник, веб-доступ	настройки установленных модулей; если модуль не установлен, его строки нет
Система	Сеть и версия	IP-адрес устройства и версия программы
Система	Платформа, Проверка Vidicap (Touch 2.0)	связь с платформой, обновления, самопроверка


На Touch 1.0 убраны пункты, которые не работали: «Режим записи», «DICOM FTP-сервер» и «Голосовая связь».



Картинка в картинке

1. В главном меню нажмите **«Настройки»**. Если включён вход по RFID-меткам, приложите метку техника.
2. Слева, в группе «Изображение», нажмите **«Картинка в картинке»**.
3. Выберите угол: нажмите кнопку угла или прямо на нужную четверть схемы кадра.
4. Выберите размер: **«Большой $\frac{1}{2}$ »**, **«Средний $\frac{1}{3}$ »** или **«Малый $\frac{1}{4}$ »** ширины кадра.

Схема сразу показывает, где и какого размера будет малое окно. Выбор сохраняется сразу, кнопки «Сохранить» нет.

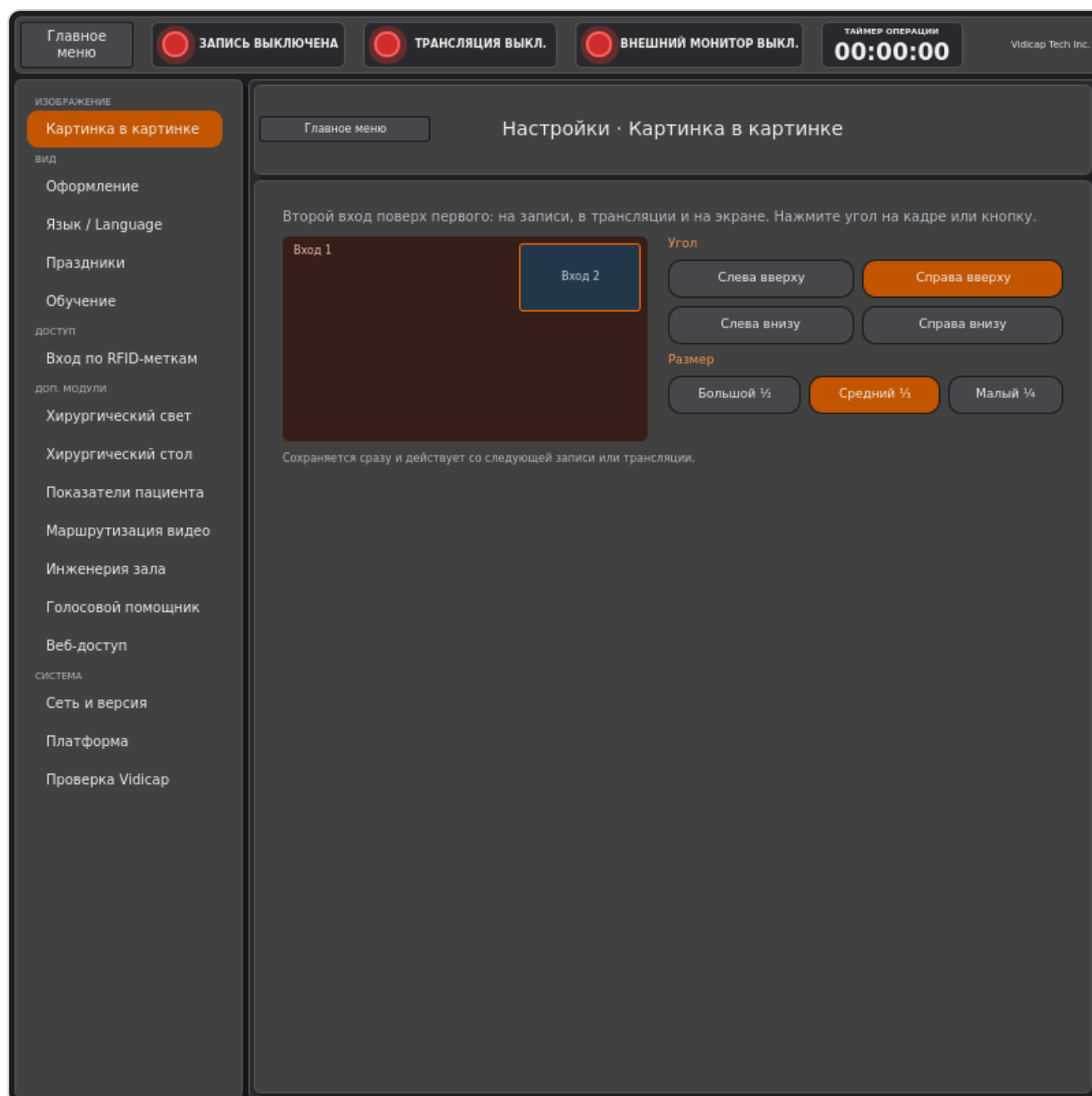


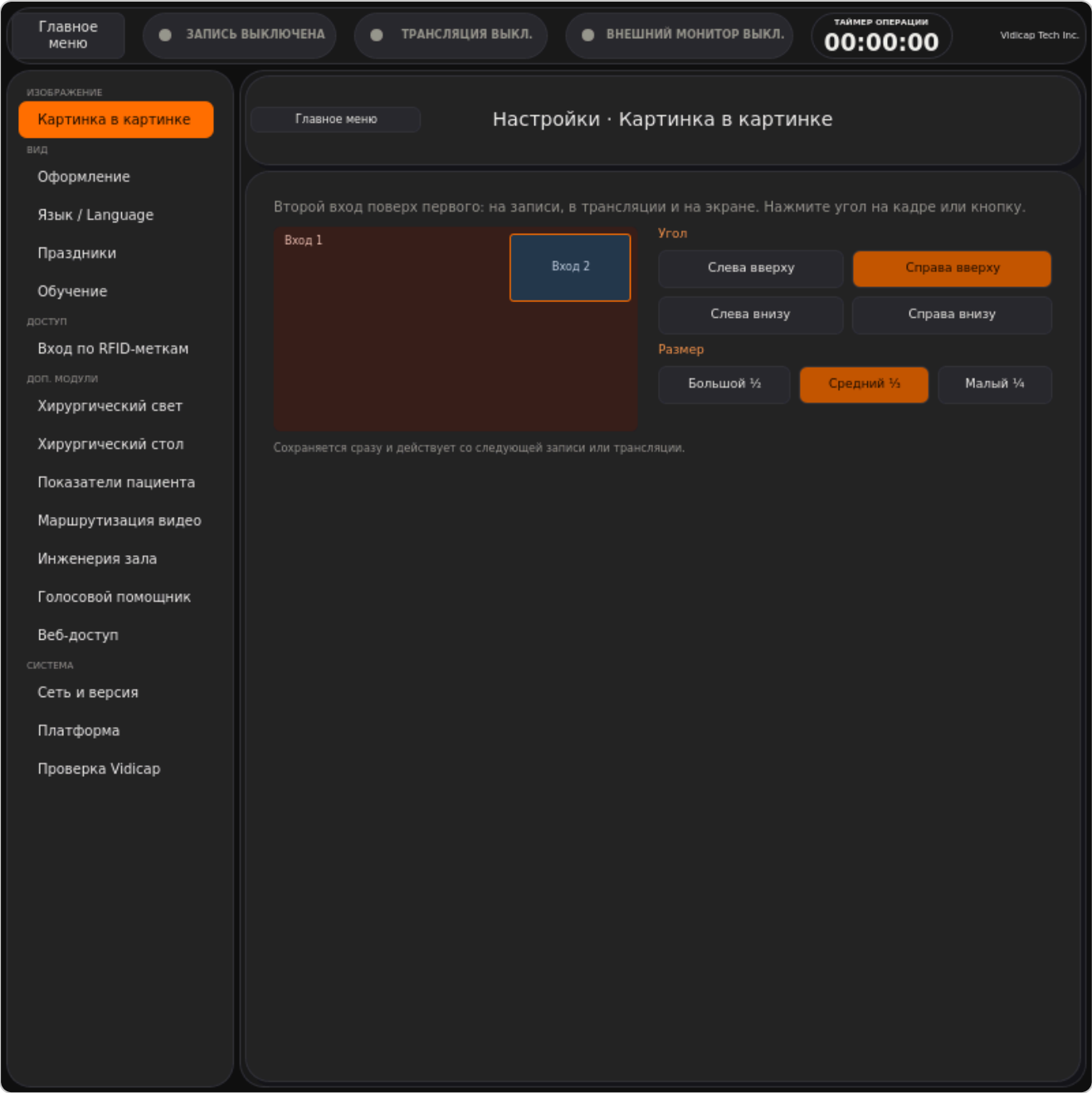


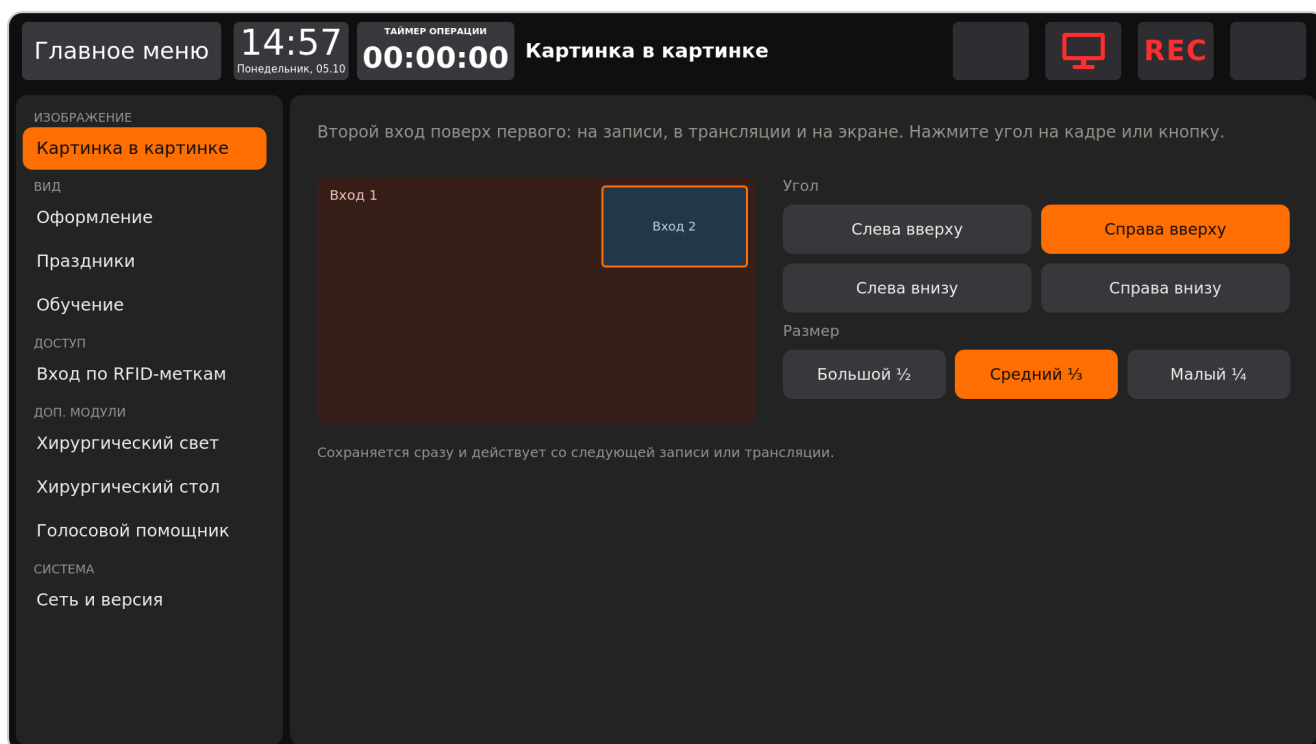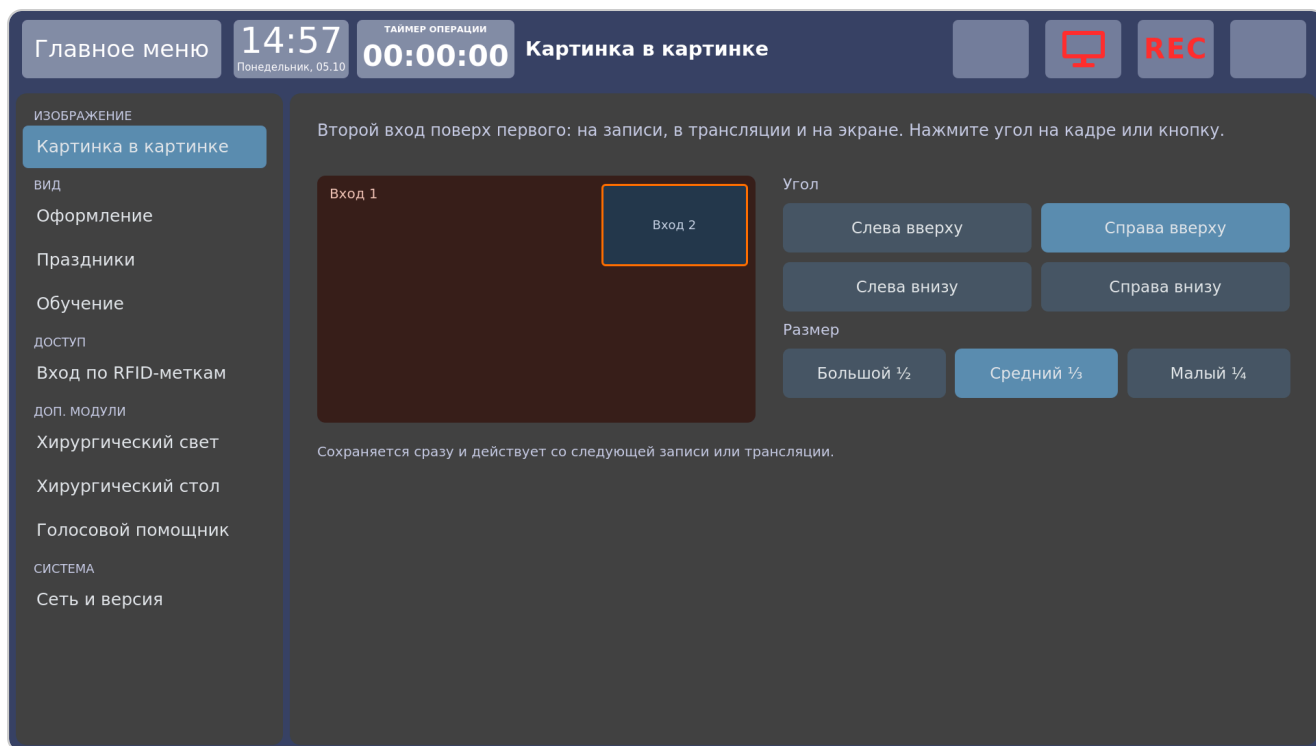


Настройки доп. модуля

1. Откройте **«Настройки»**.
2. Слева, в группе **«Доп. модули»**, нажмите нужный модуль, например **«Хирургический свет»**.
3. Справа откроется экран настроек модуля. Список слева остаётся: можно сразу нажать другой раздел.
4. Чтобы выйти, нажмите **«Главное меню»** вверху слева.

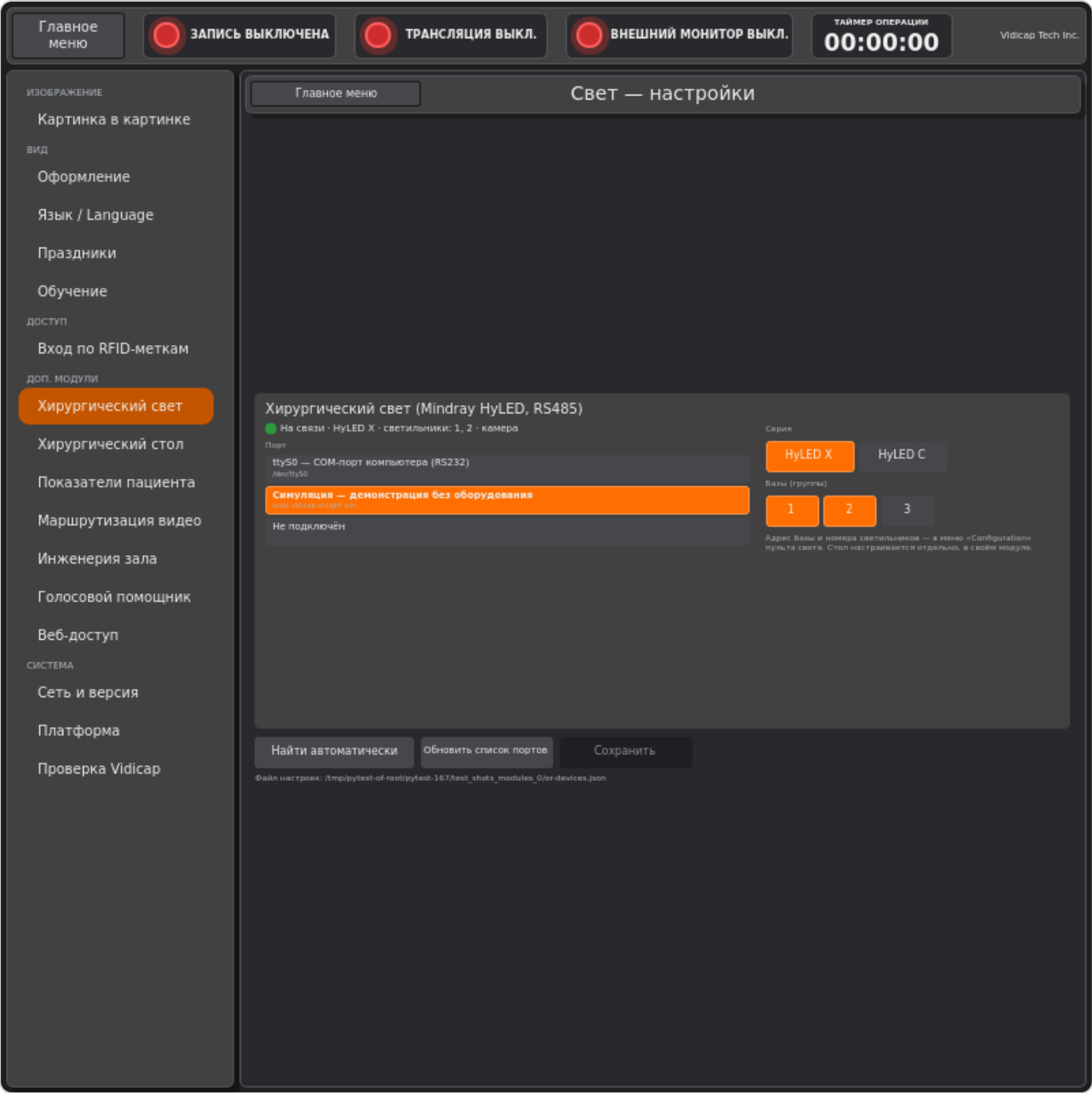


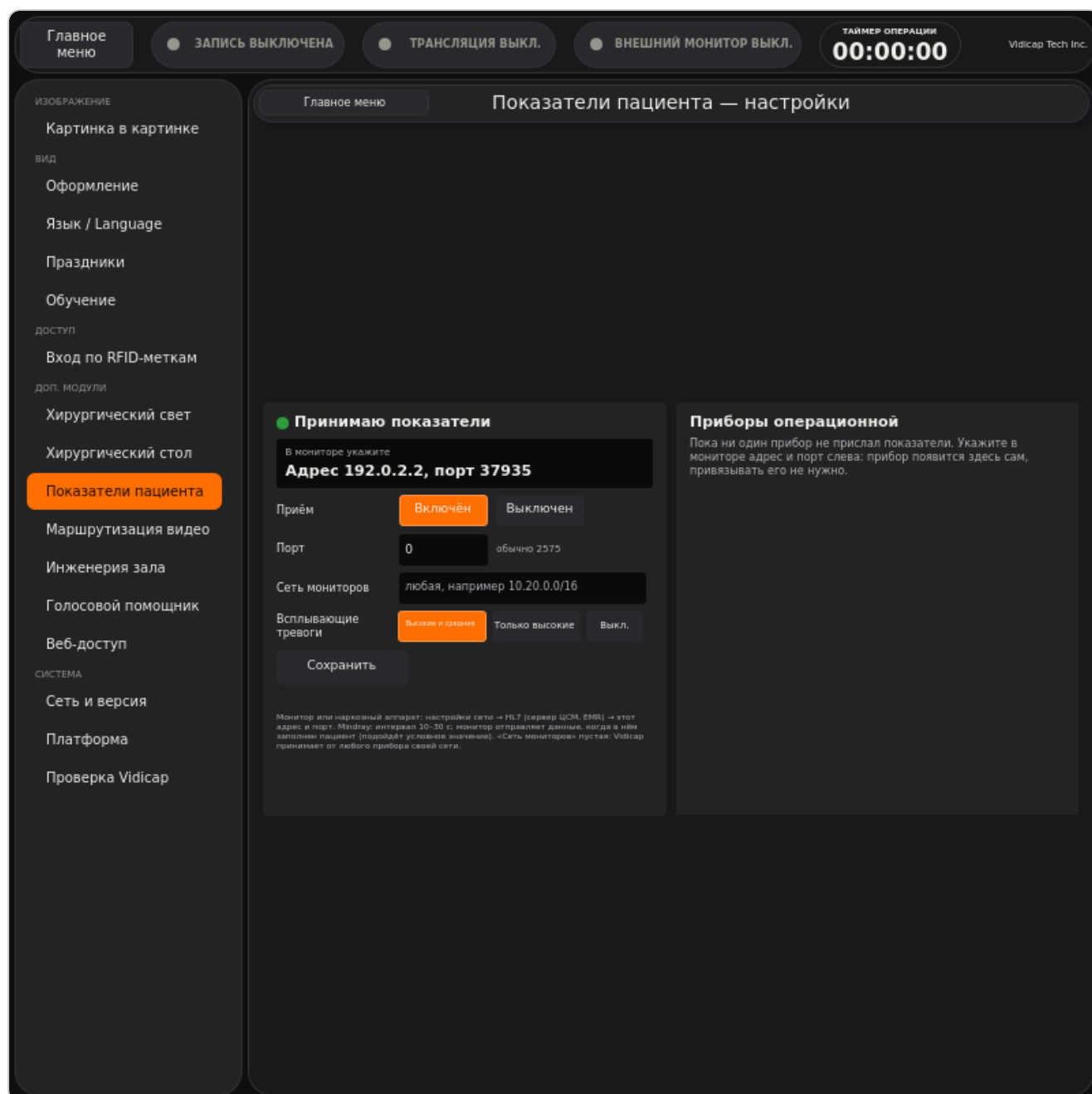

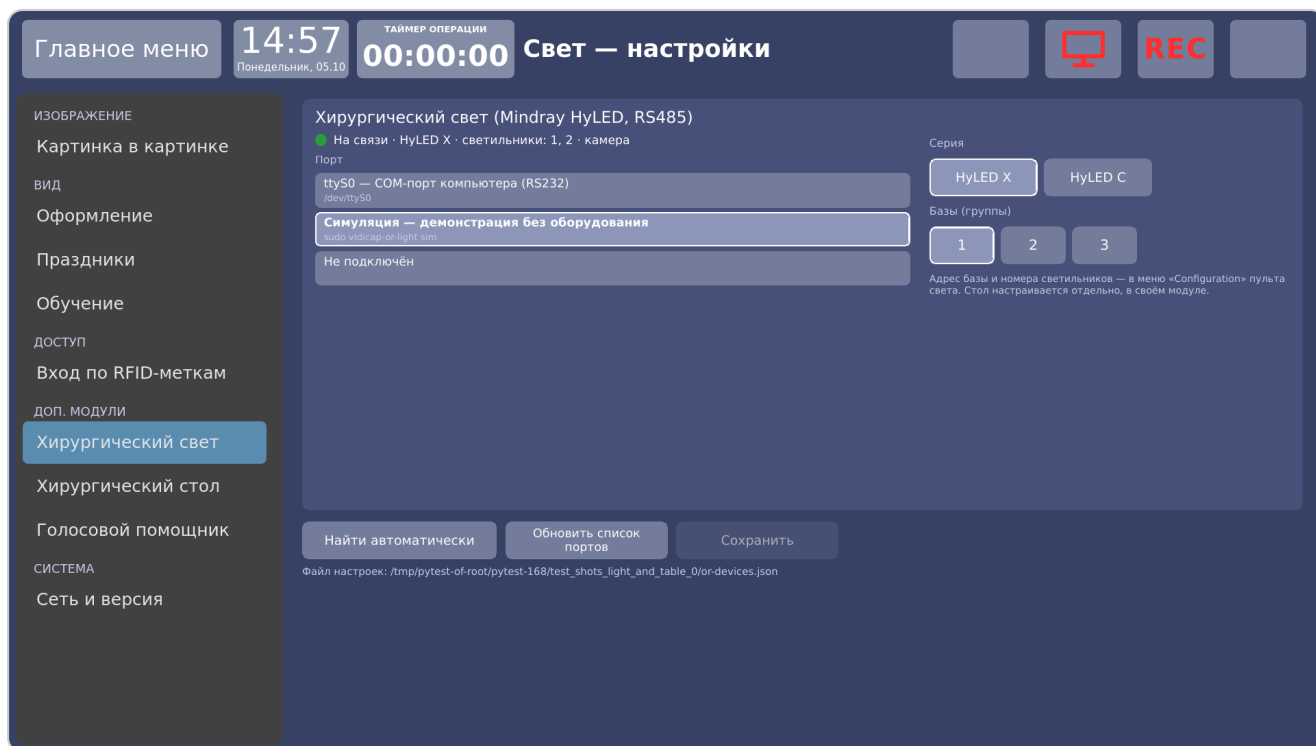

Оформление, обучение, сеть и версия

Слева, в группе «Вид», нажмите **«Оформление»** и выберите тему: экран сразу перекрашивается. Подробнее — в руководстве «Оформление экрана». **«Обучение»** запускает подсказки снова (руководство «Обучение на экране Vidicap»).

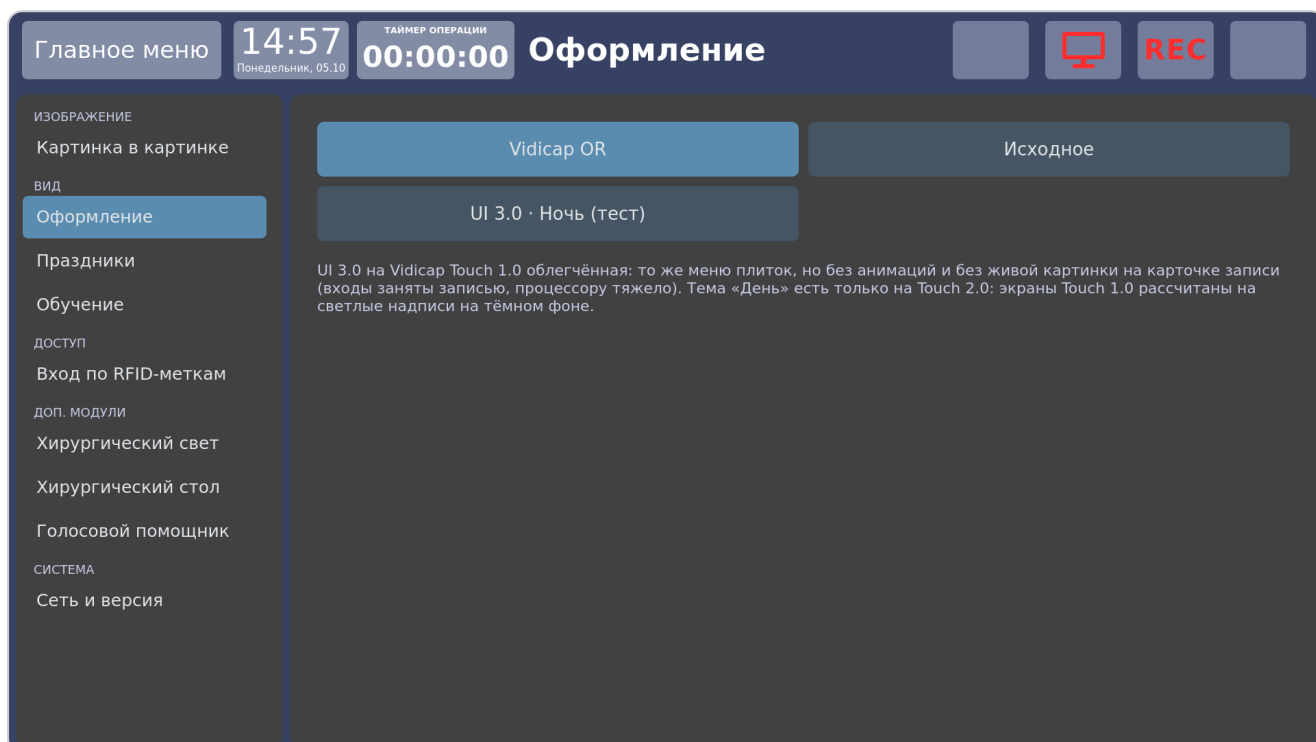

В группе «Система» раздел **«Сеть и версия»** показывает текущий IP-адрес устройства и версию программы. На Touch 1.0 адрес обновляется каждый раз, когда раздел открывают.