



МАНУАЛ

Обучение на экране Vidicap

Для Touch 1.0 и 2.0: подсказки со стрелками на главных кнопках при первом запуске, для новых модулей и после обновлений; как пройти снова.

Для врачей, техников и администраторов

05.10.2026

Содержание

Когда Vidicap предлагает обучение

Vidicap Touch 2.0

Пройти снова и настроить

Vidicap Touch 1.0

Пройти снова и настроить

Обучение по новому интерфейсу UI 3.0

Что важно знать

Vidicap сам показывает, где главные кнопки: экран за подсказкой размывается (на Touch 1.0 затемняется), нужная кнопка обведена оранжевой рамкой, к ней ведёт стрелка, рядом короткое пояснение. Обучение есть в базовой программе обеих ревизий, ставить модуль не нужно.

Ревизия	Что нужно
Vidicap Touch 2.0	версия 2.26.0 и новее
Vidicap Touch 1.0	программа 1.29.0 и новее; кнопка «Платформа» 1.30.0 и новее (переводы на английский и белорусский)
Обучение по новому интерфейсу UI 3.0	Touch 2.0 2.39.0 , Touch 1.0 1.34.0 , кнопка «Платформа» 1.41.0 и новее

Обе обновляются с экрана: «Платформа» → «Проверить обновления».

Когда Vidicap предлагает обучение


- **При запуске**, пока основы не пройдены: «Знакомство с Vidicap», шесть шагов, около минуты. Кнопка «**Позже**» спросит при следующем запуске, галочка «**Больше не показывать**» убирает вопрос совсем.
- **Новый модуль**: после установки доп. модуля Vidicap обводит его плитку и предлагает показать за 30 секунд, как им пользоваться.
- **После обновления**: если в обновлении есть обучение «Что нового», оно предлагается так же. Первые такие обучения придут со следующими обновлениями.

Vidicap не спрашивает во время записи, трансляции и таймера операции, а также когда открыт не главный экран. За один запуск он спрашивает не больше одного раза. В праздник сначала показывается поздравление, обучение предлагается после того, как его закроют.


Если включён вход по RFID-меткам, основы помнятся для каждого сотрудника: новый врач увидит предложение при своём первом входе, даже если на этом Vidicap обучение уже проходили.


Vidicap Touch 2.0

1. При запуске появляется «Знакомство с Vidicap». Нажмите «**Начать**».

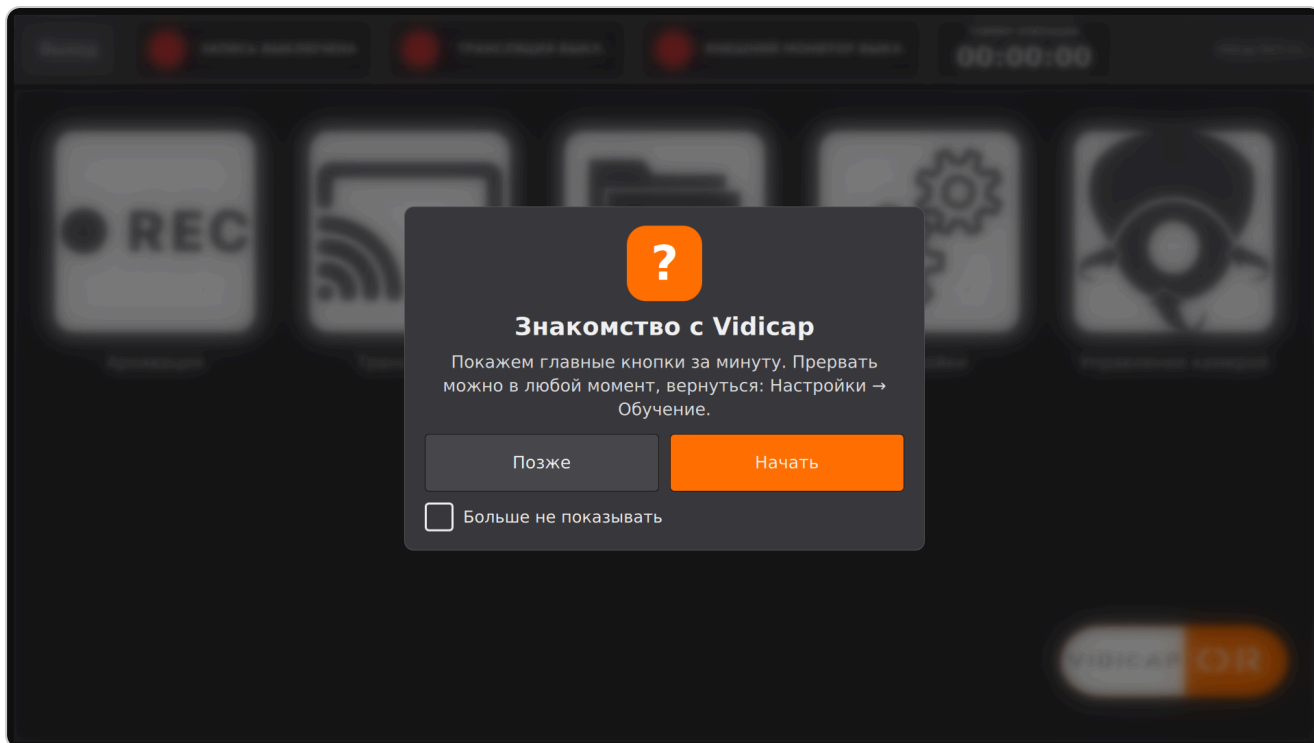


2. На каждом шаге прочитайте пояснение и нажмите **«Далее»**. Нажатие на обведённую кнопку тоже переходит дальше и саму кнопку не нажимает, так что запись случайно не начнётся. **«Назад»** возвращает на шаг, **«Пропустить обучение»** закрывает его.

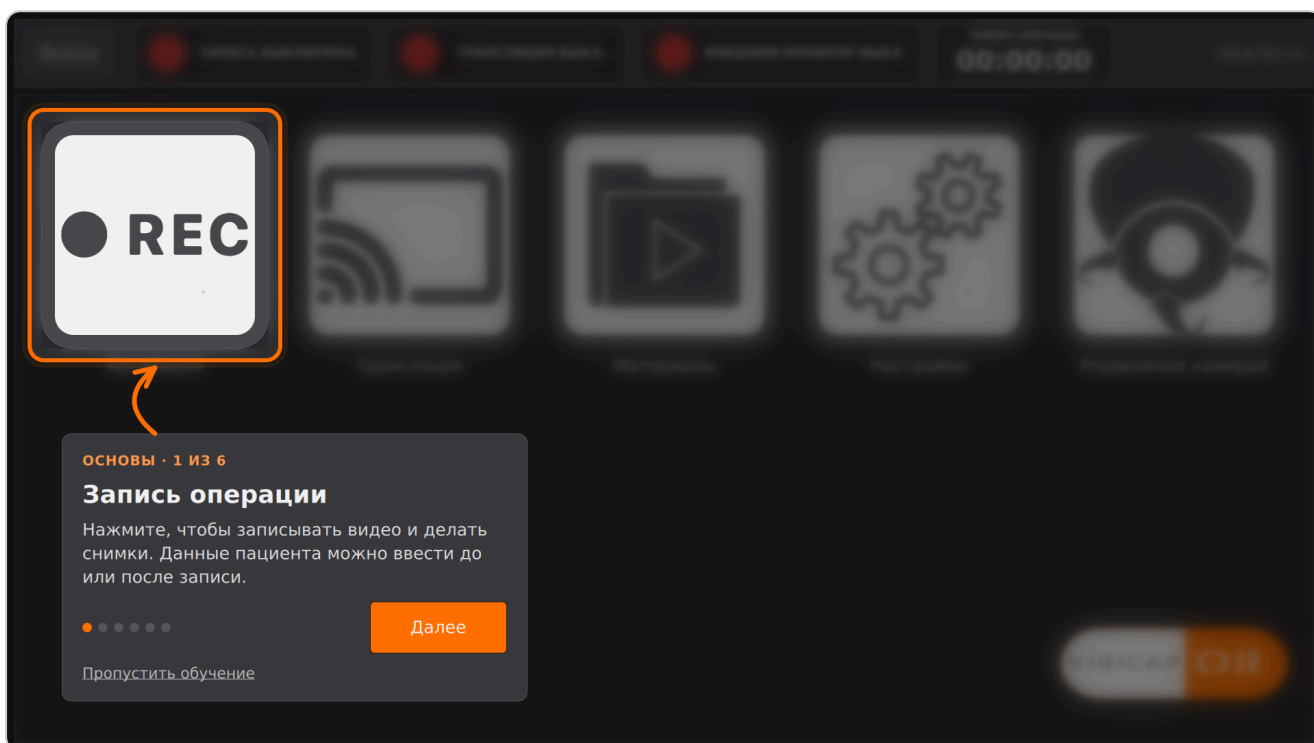

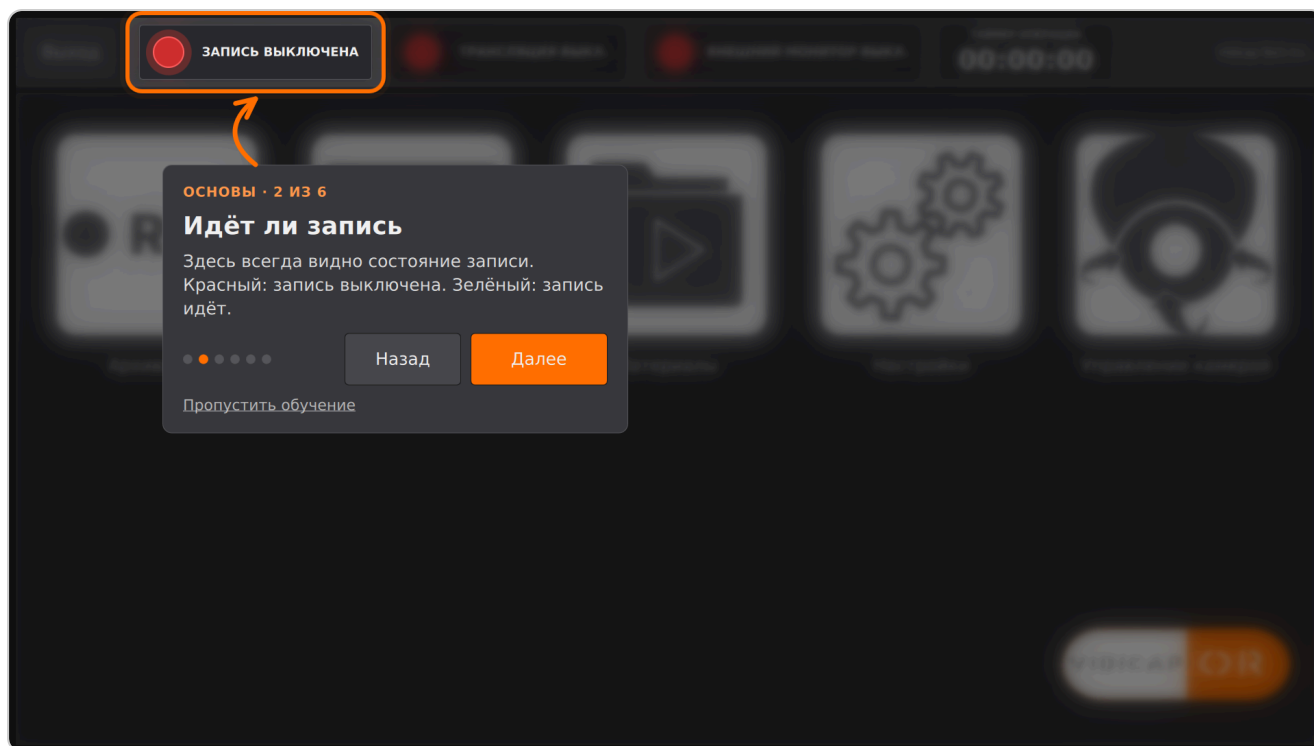


3. Новый модуль предлагается на его плитке. Если плитка на второй странице меню, меню само туда перелистнётся.

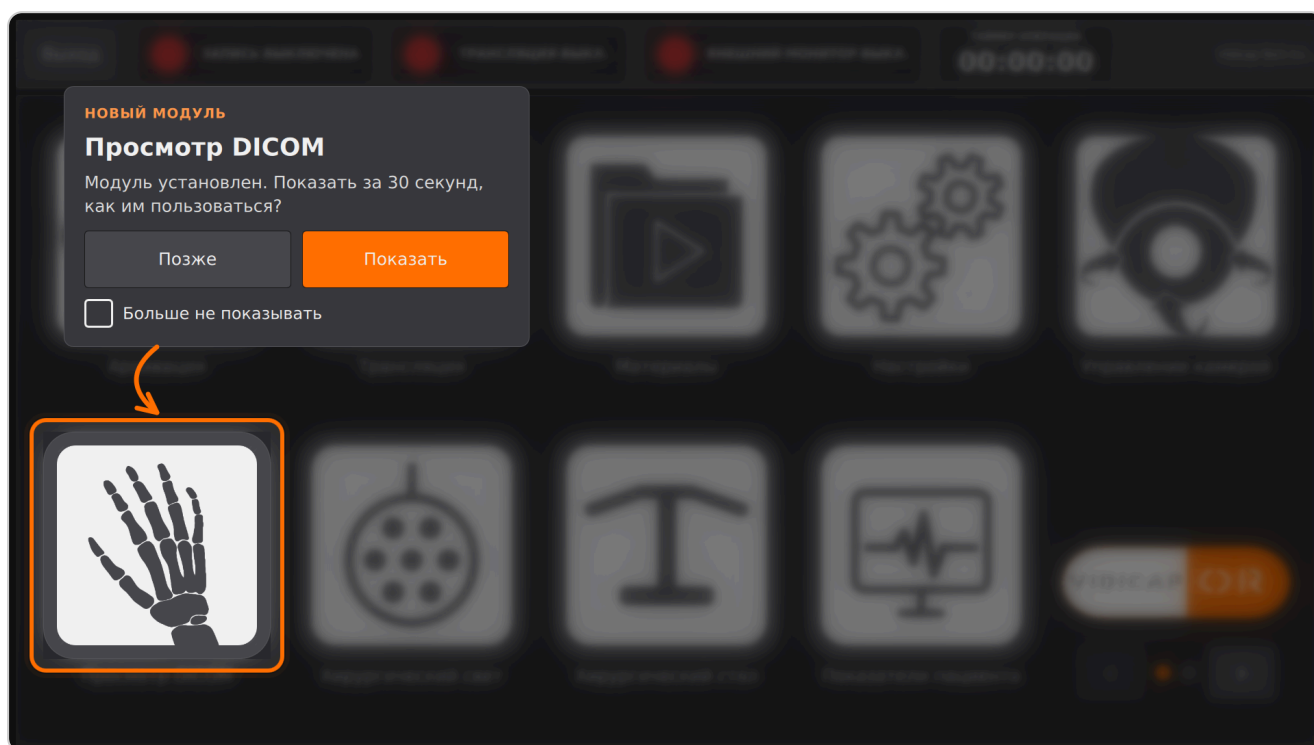

Пройти снова и настроить


1. В главном меню нажмите **«Настройки»**. Если включён вход по RFID-меткам, приложите метку техника.
2. Слева нажмите **«Обучение»**.
3. Справа список обучений этого Vidicap: основы и каждый установленный модуль, пройдено или нет. **«Пройти»** или **«Повторить»** запускает обучение.



4. Ниже переключатели «Когда предлагать»: при запуске, для новых модулей, после обновлений. **«Вернуть все подсказки»** снимает все отметки «Больше не показывать».

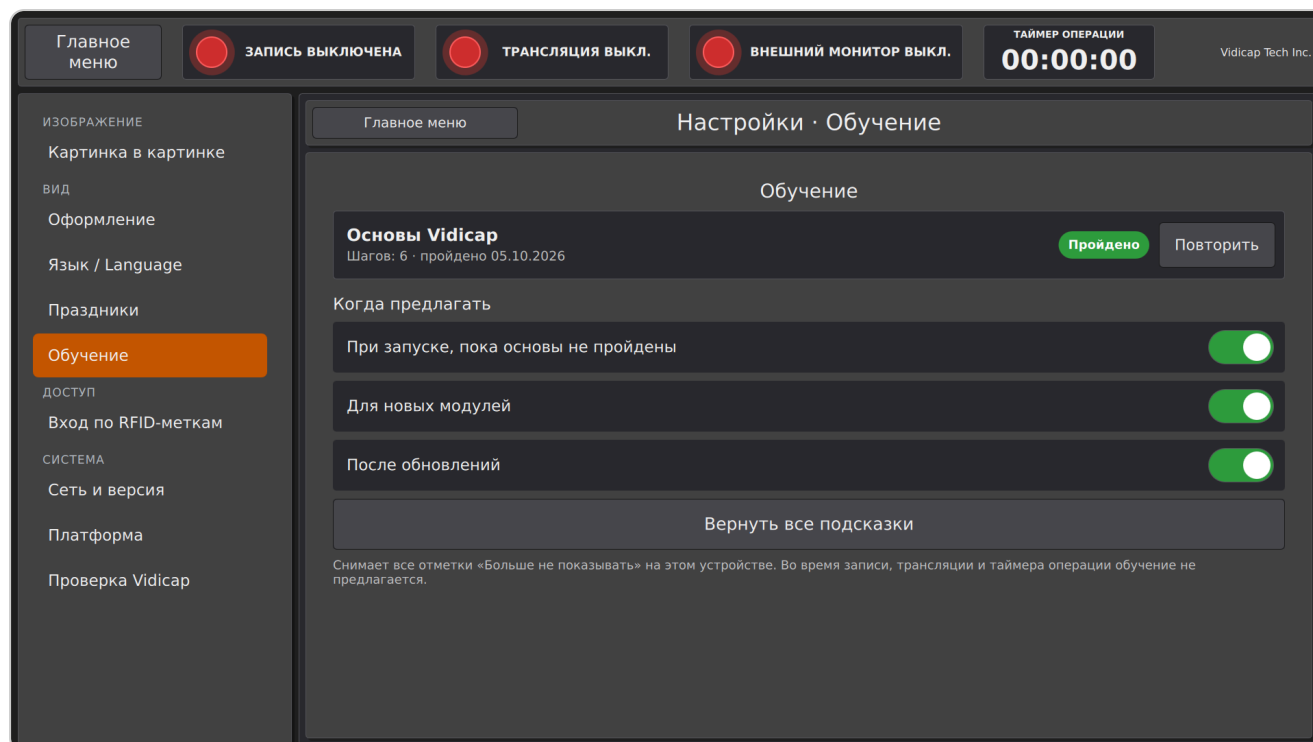

Vidicap Touch 1.0


Всё так же, но экран за подсказкой не размывается, а затемняется: размытие живого экрана слишком тяжело для компьютера Touch 1.0 и мешало бы записи.

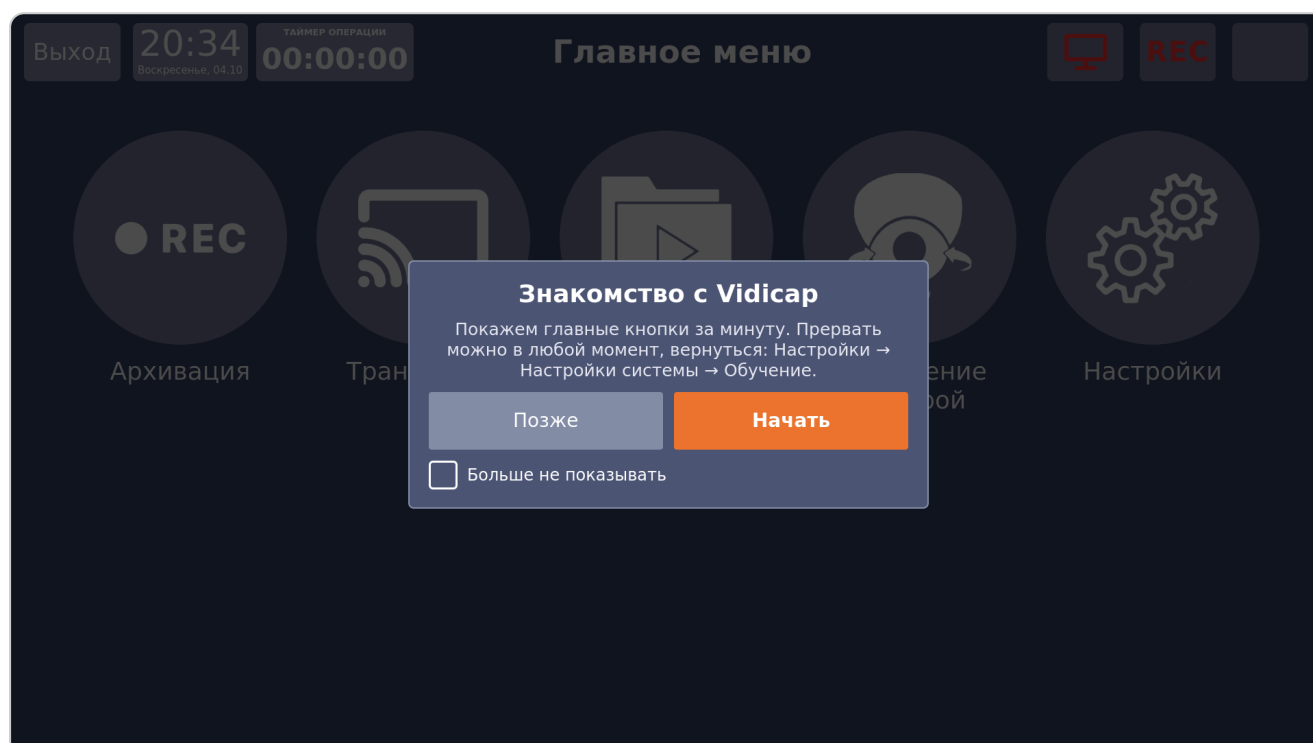

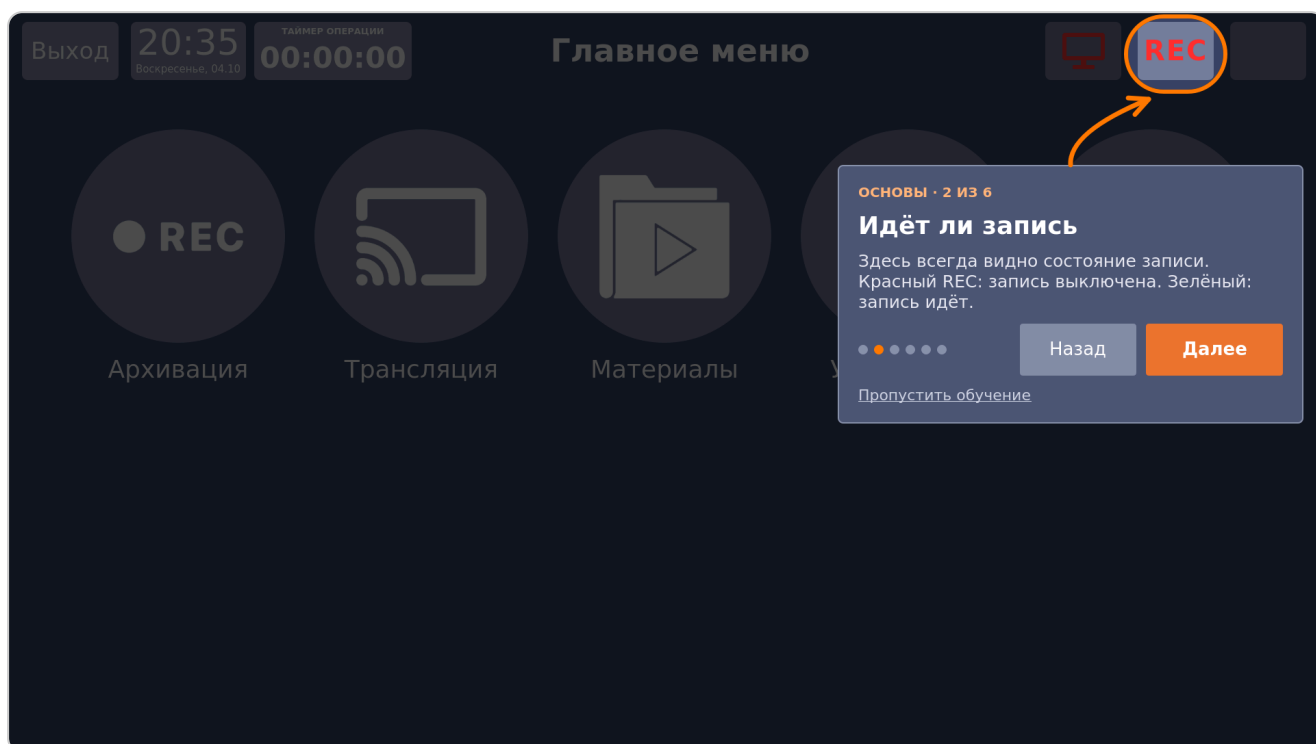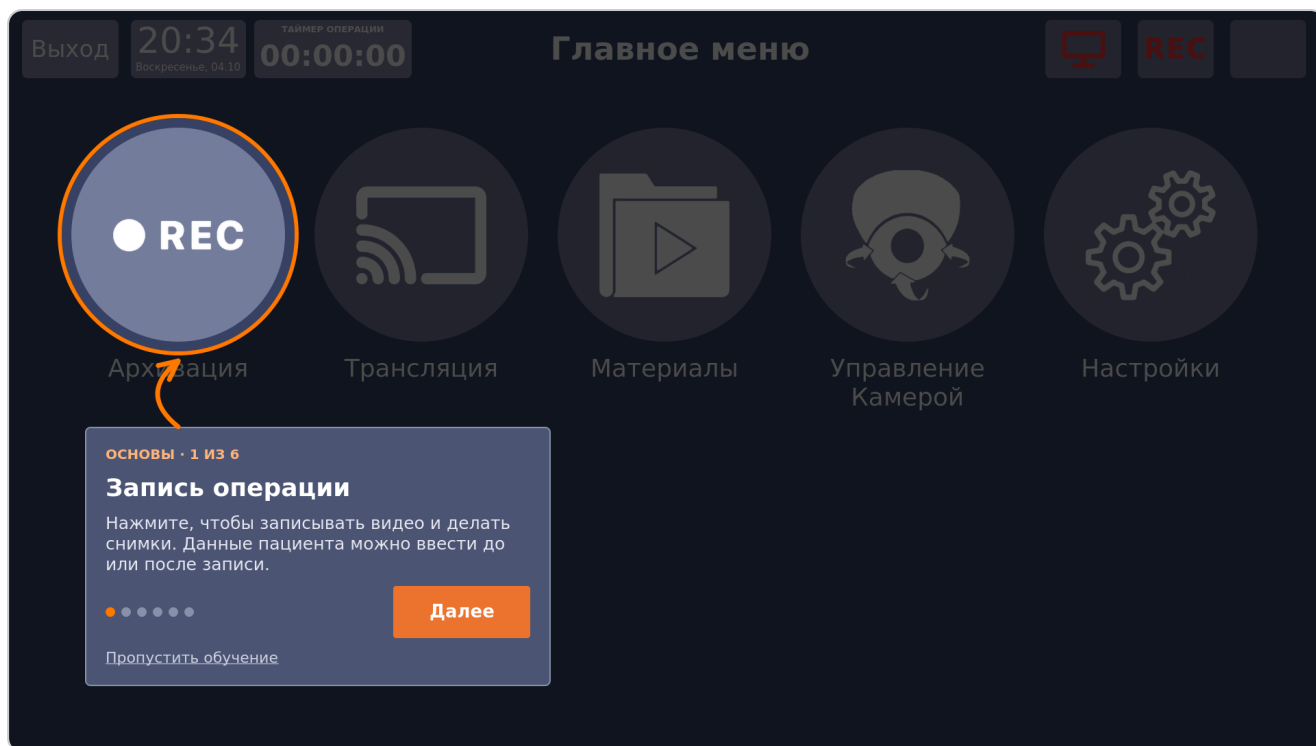


Пройти снова и настроить

1. В главном меню нажмите **«Настройки»**.
2. Слева, в группе «Вид», нажмите **«Обучение»**.
3. Нажмите **«Обучение и подсказки»**.

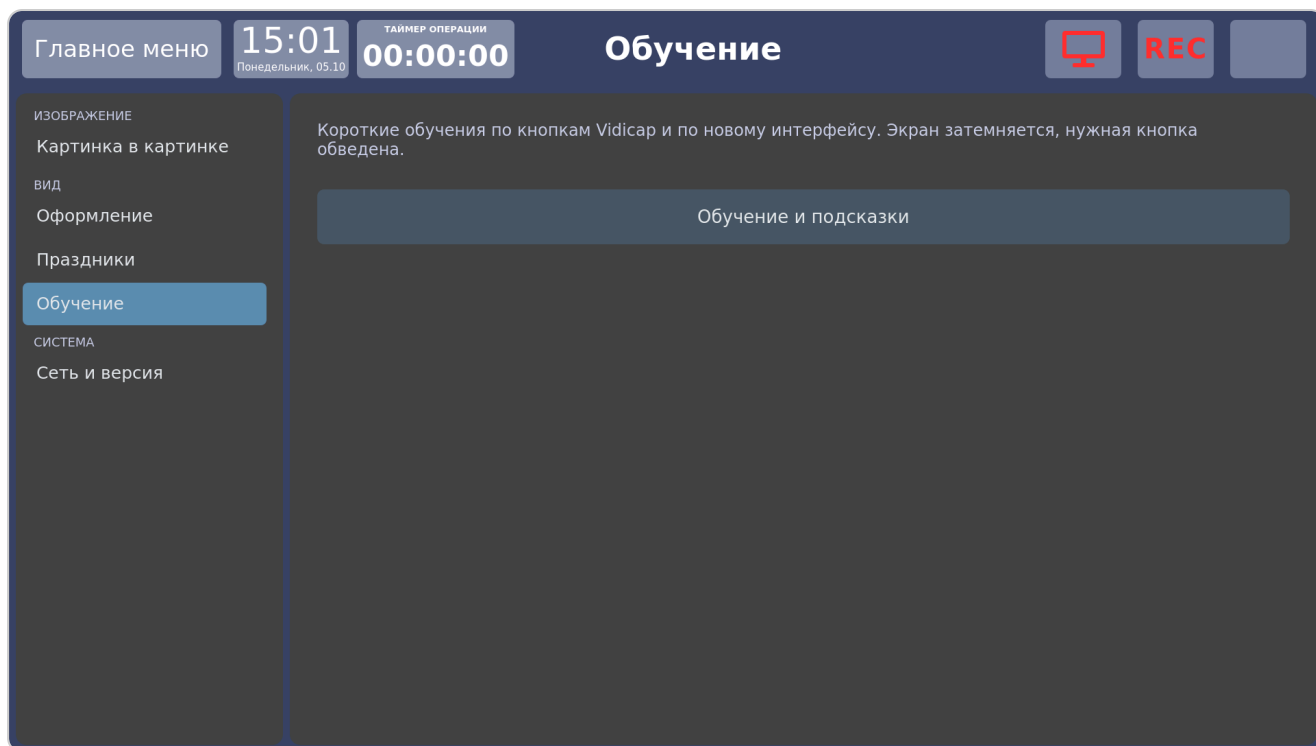

4. В окне список обучений с кнопками «**Пройти**» и «**Повторить**», переключатели «При запуске» и «Для новых модулей» и «**Вернуть все подсказки**».

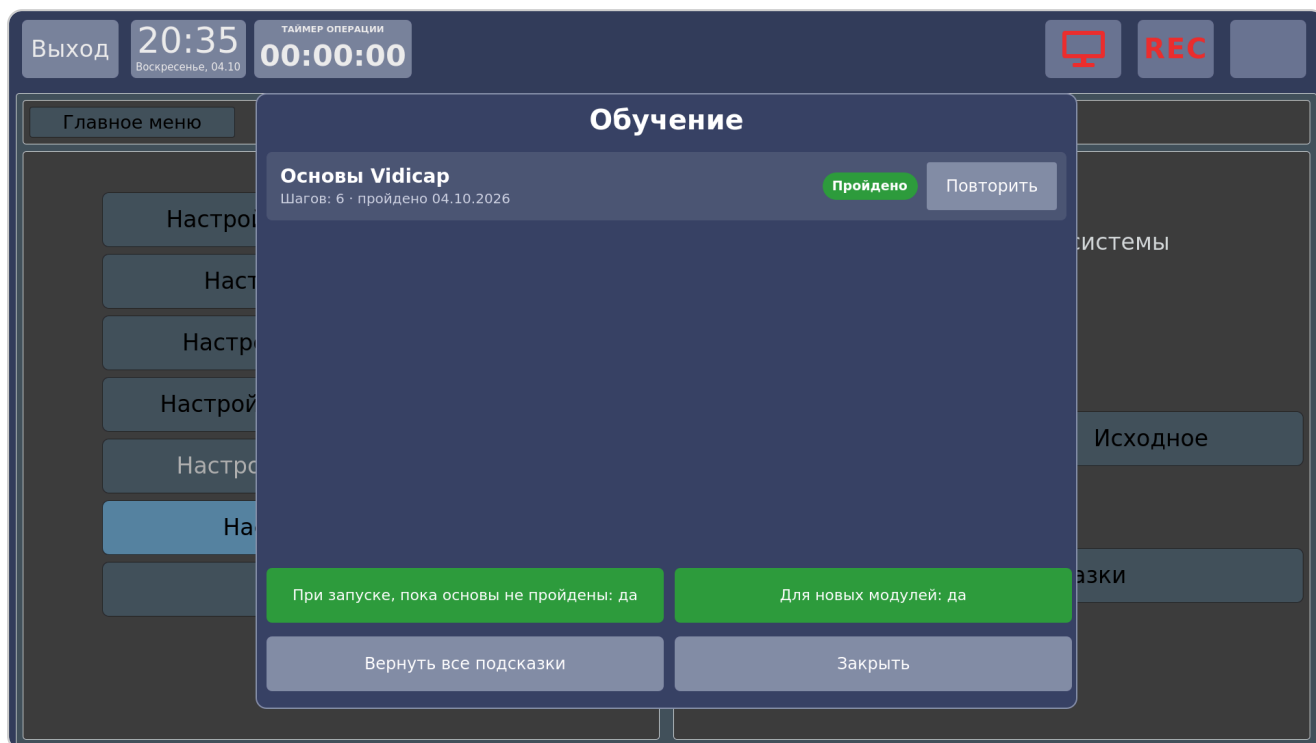


Обучение по новому интерфейсу UI 3.0



Когда на устройстве выбирают тестовую тему «**Vidicap UI 3.0**» («Настройки» → «Оформление» на Touch 2.0, «Настройки» → «Оформление» на Touch 1.0), Vidicap сразу по возвращении в главное меню предлагает отдельное обучение «**Новый интерфейс UI 3.0**». Оно идёт по настоящему экрану и занимает около двух минут.



Что показывает обучение, по шагам:



1. **Новый вид главного меню.** Слева карточка записи, справа плитки модулей; нажатие на свободное место плитки, как раньше, открывает модуль.
2. **Карточка записи.** На Touch 2.0 живая картинка входа и время записи, на Touch 1.0 крупное время записи. Нажатие открывает «Архивацию».
3. **Строка состояния** (на Touch 1.0 индикатор REC): идёт ли запись, трансляция, внешний монитор.
4. **Плитки показывают, что внутри:** «В эфире» у трансляции, модель у маршрутизации и ИИ, «Включён» у света.
5. **Показатели пациента на плитке:** этот шаг есть, только если установлен модуль «Показатели пациента».
6. **Быстрые кнопки:** – и + у света или пауза у музыки, если эти модули установлены.
7. **Удержание вместо «Вы уверены?».** Это шаг-тренировка: в подсказке кнопка «Удерживайте меня». Её нужно держать, пока она не заполнится цветом, и только тогда открывается «Далее». Так работают «Стоп» записи и «Включить» свет.
8. **Во время записи** (только Touch 2.0): на карточке появляются «Снимок» и «Стоп».
9. **Ещё плитки:** если модулей больше восьми, как листать страницы.
10. **Таймер операции.**
11. **Как вернуть прежний вид:** где выбрать «Vidicap OR» или «Исходное».


Обучение предлагается до тех пор, пока его не пройдут или не отметят «Больше не показывать», и раньше «Знакомства с Vidicap»: оно и так объясняет меню. Пройти снова: «Обучение» в настройках, строка «**Новый интерфейс UI 3.0**» (она видна, пока выбрана тема UI 3.0).

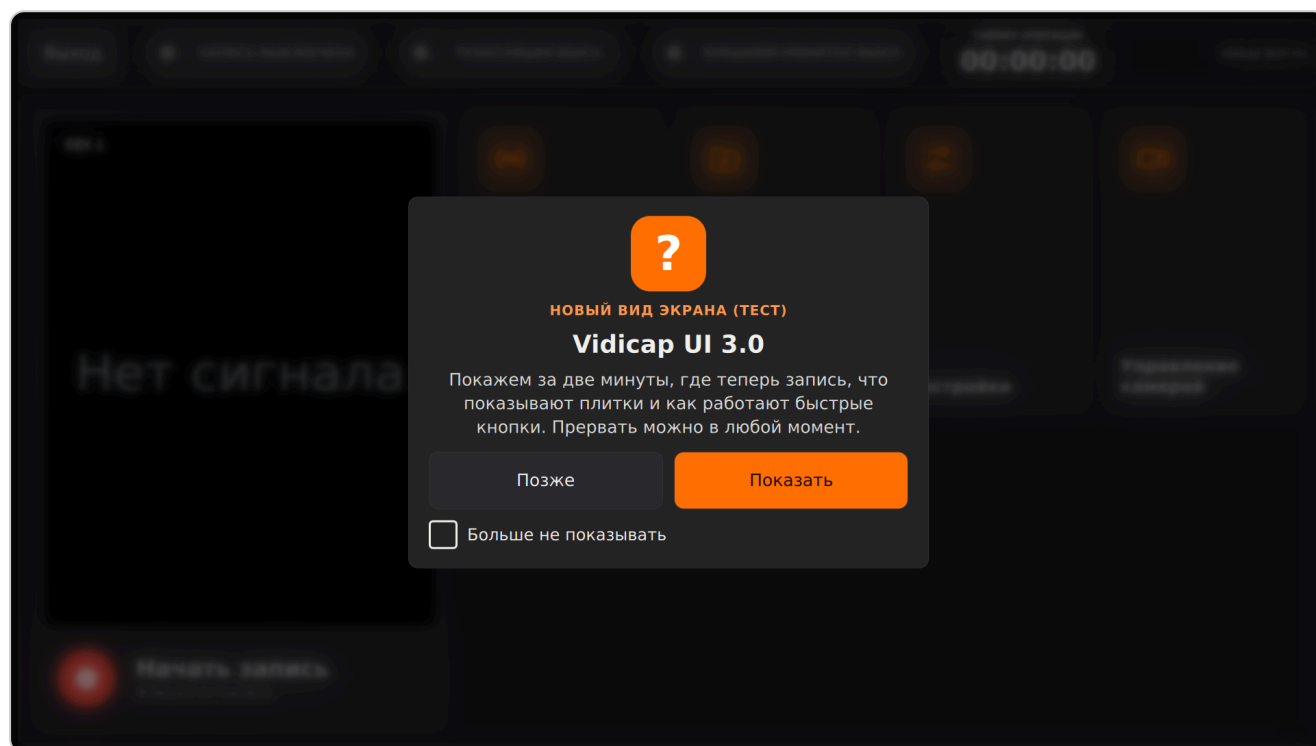

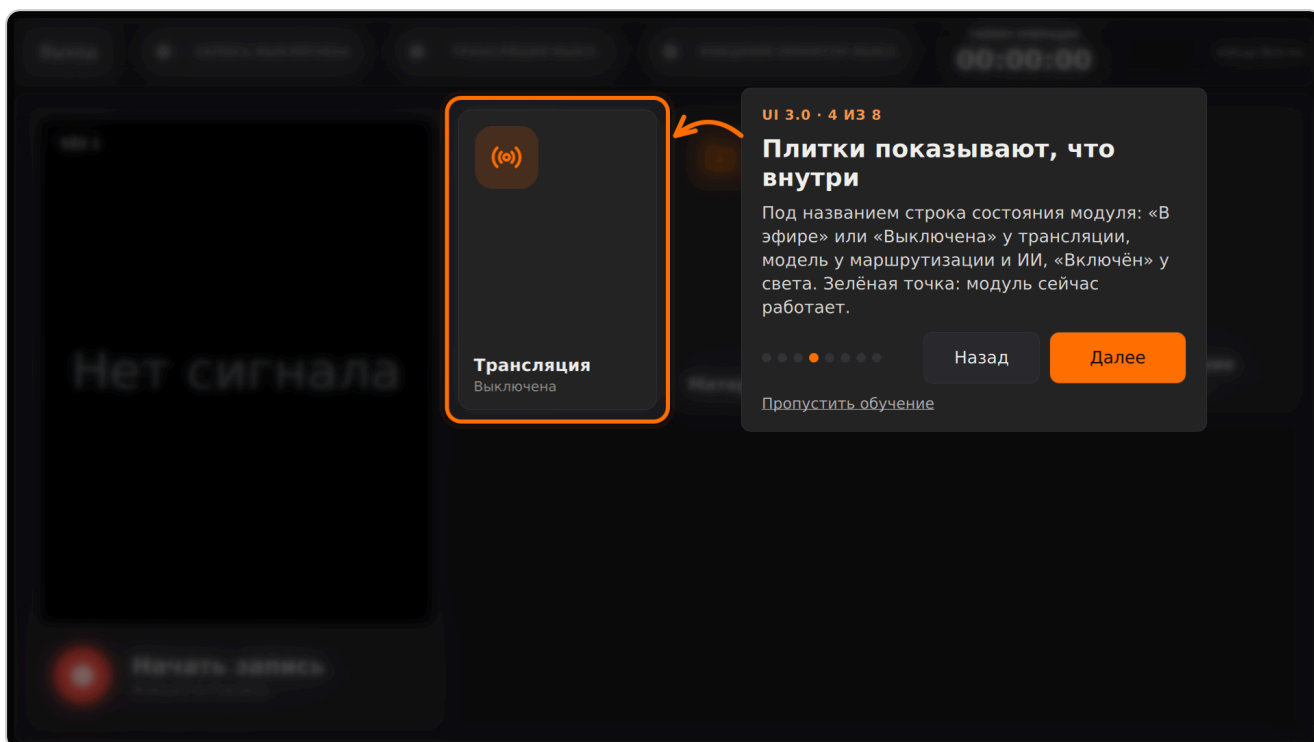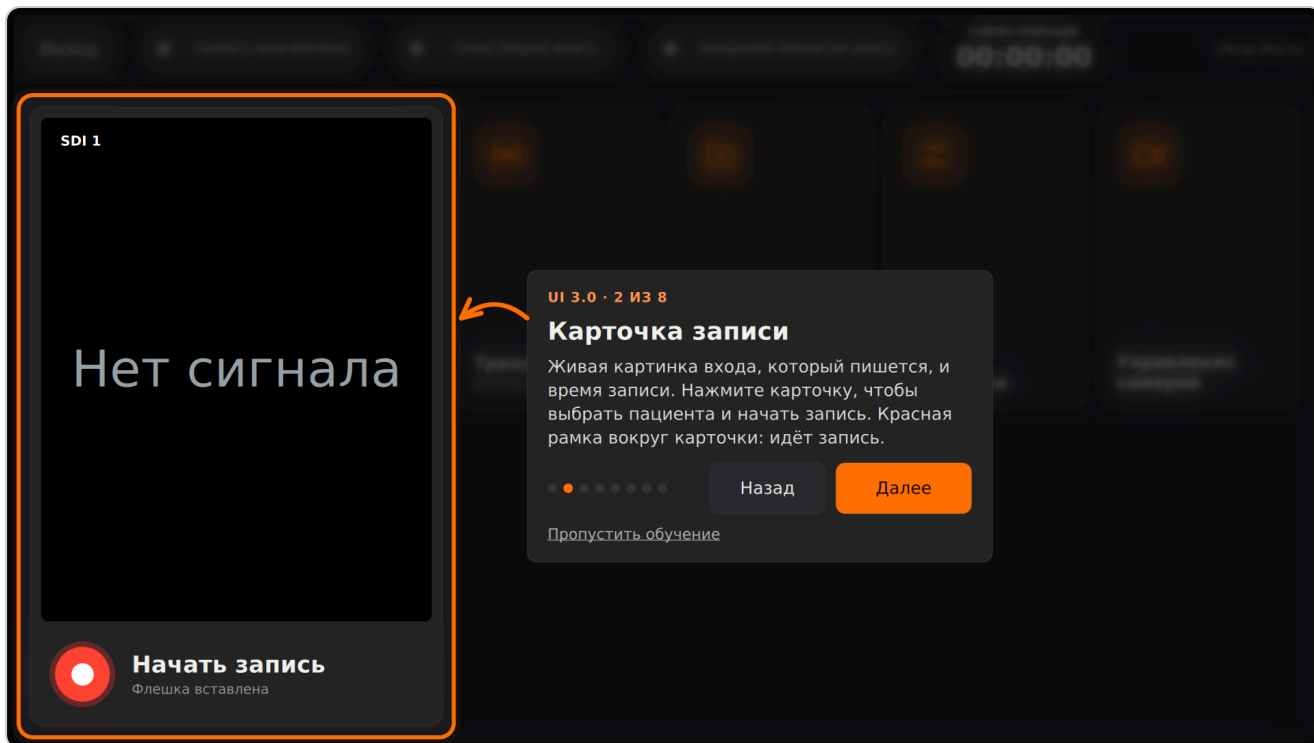

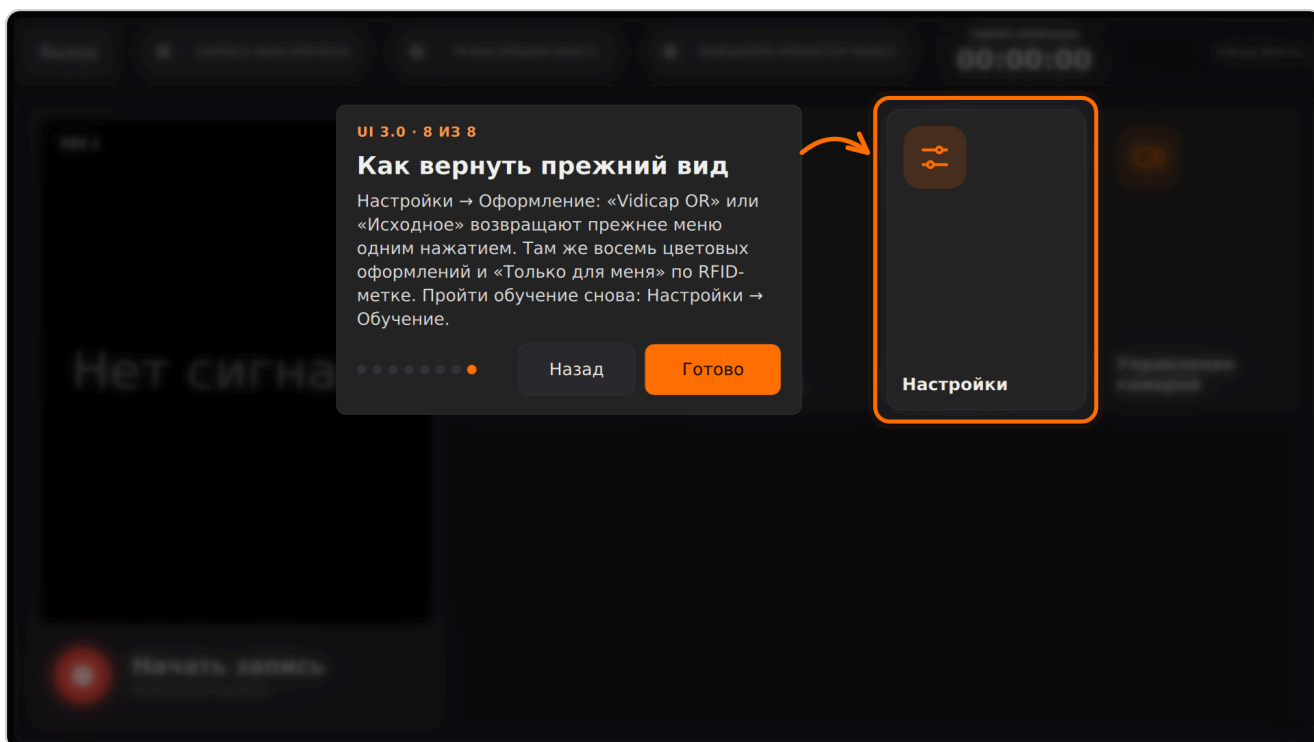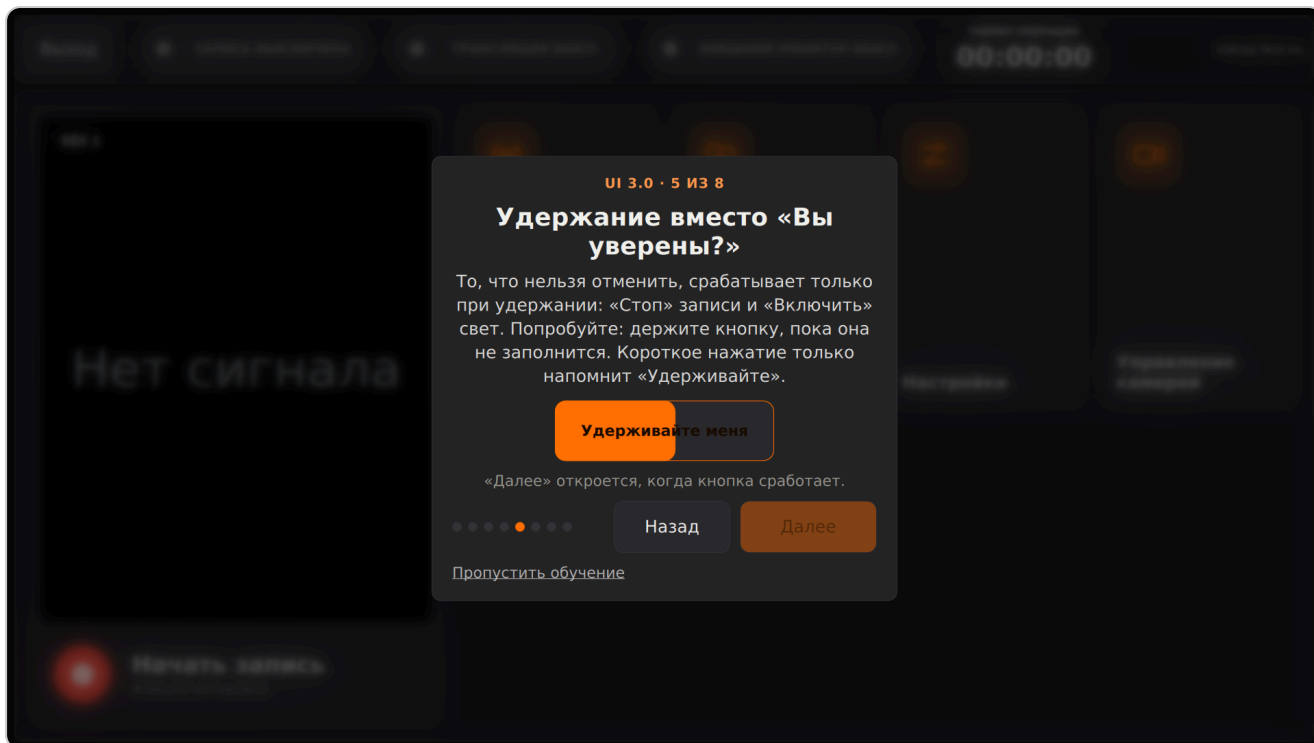

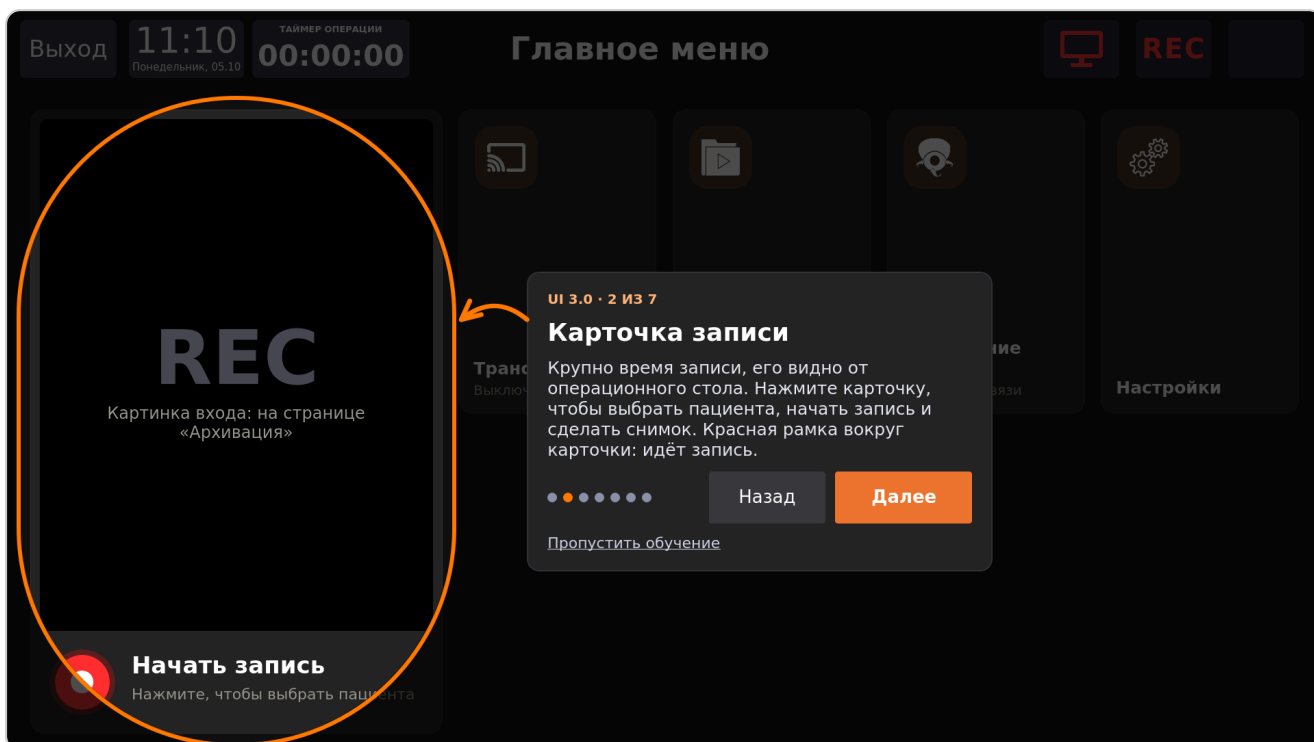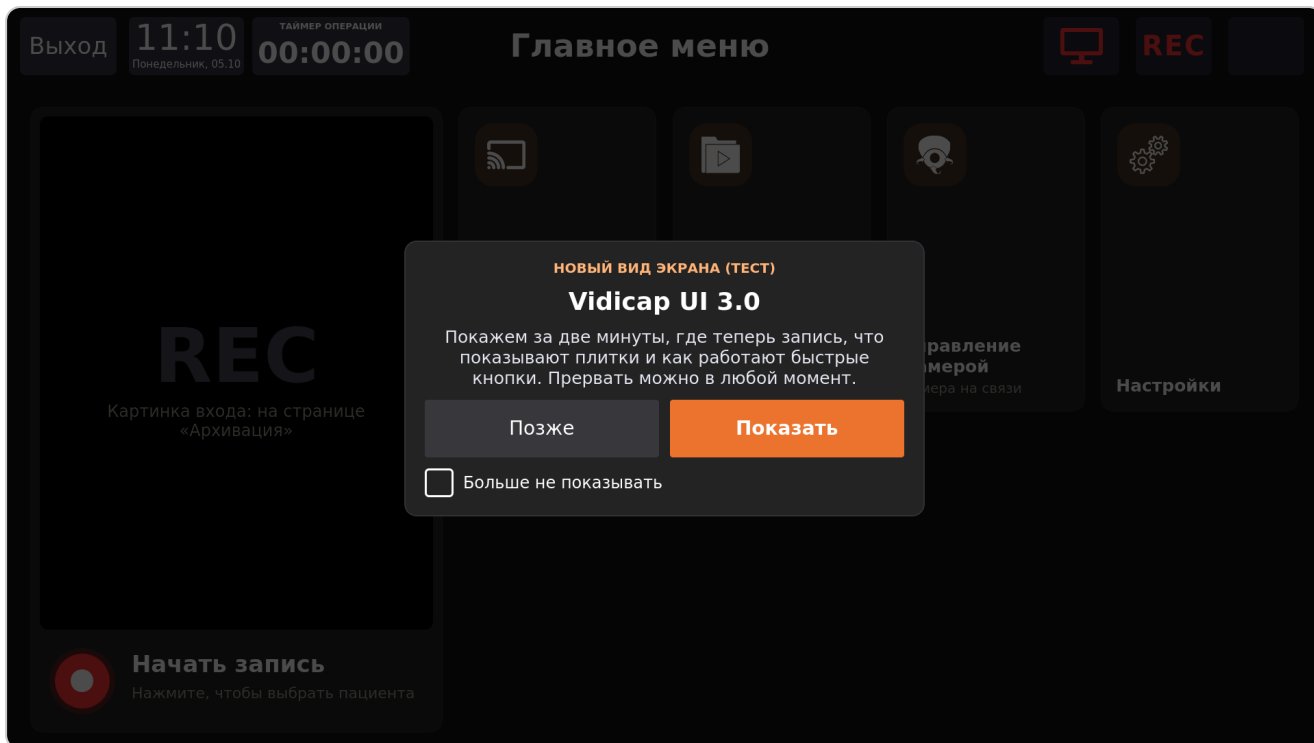

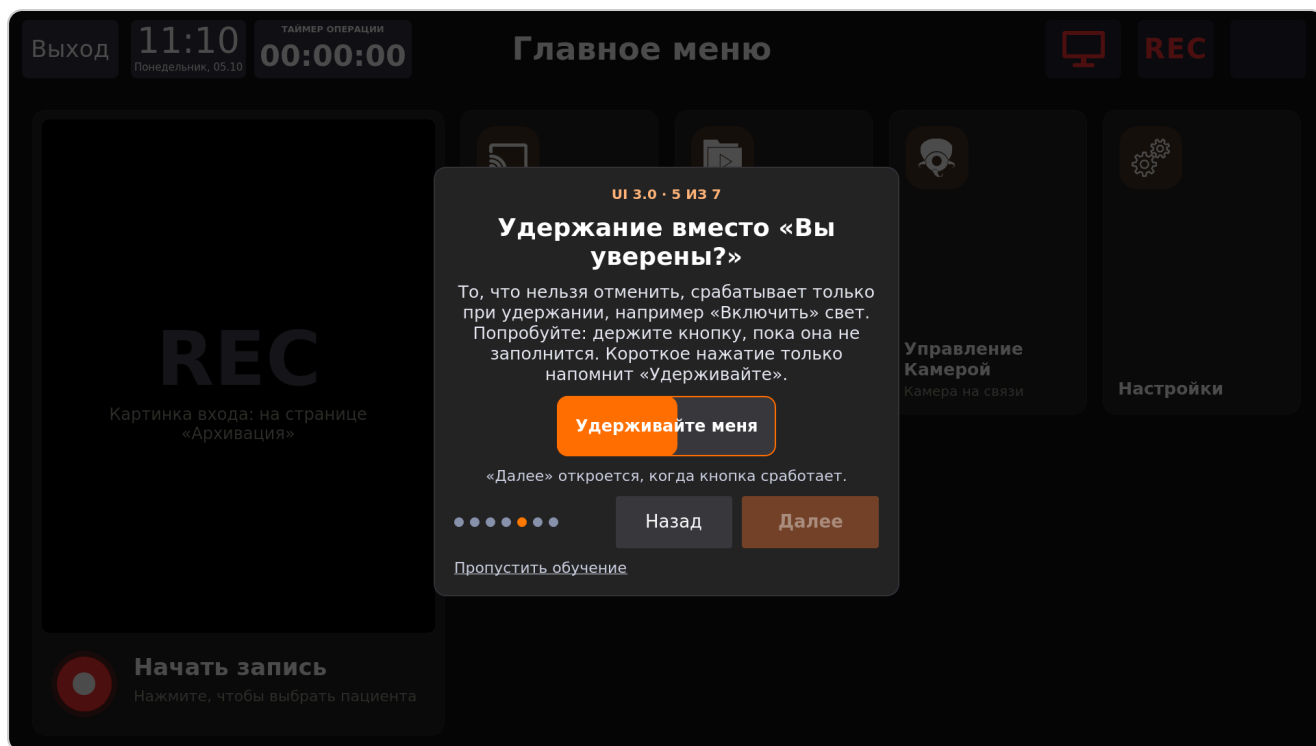

Что важно знать

- **Отметки хранятся на самом устройстве** (что пройдено, «Больше не показывать», какие модули уже были). На платформу и на другие Vidicap они не передаются, данных пациентов в них нет.
- **Обучение ничего не нажимает за вас**: оно только показывает. Чтобы начать запись, после обучения нажмите кнопку как обычно.
- **Эмулятор Vidicap** на платформе показывает то же обучение, так что его можно пройти без устройства.